


機械器具(22) 検眼用器具
一般医療機器 細隙灯顕微鏡 (35148000)

「スリットランプ SL - D2」
「スリットランプ SL - D4」
「スリットランプ SL - D7」
「スリットランプ SL - D8Z」
「スリットランプ SL - 2G」
「スリットランプ SL - D701」
「スリットランプ SL - D301」の付属品 **
平行視接眼鏡 PB - 2

**【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は、平行視接眼鏡のみで構成される。
(型式: PB-2)

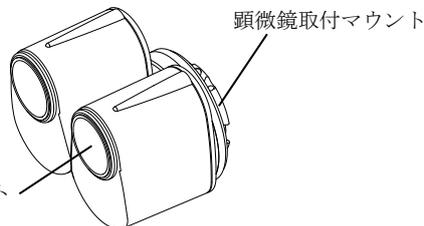

2. 寸法: 98~119mm(W) × 80mm(D) × 83mm(H)

* 3. 使用環境

温度: 10°C~40°C
湿度: 30%~90% (結露なきこと)
気圧: 700hPa~1060hPa

【使用目的又は効果】

顕微鏡部の構成部品である接眼鏡と交換し用いる。

**【使用方法等】

<使用方法>

1. スリットランプ顕微鏡部から接眼鏡を取り外します。
2. 本品をスリットランプ顕微鏡部に取り付けます。
3. 取り外した接眼鏡に付いている接眼鏡レンズ(2ヶ)を取り外し、本品に取り付けます。

詳細はスリットランプ本体の「取扱説明書」を参照のこと。

**【使用上の注意】

重要な基本的注意

本品が確実に取り付けられていること。

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

詳細はスリットランプ本体「取扱説明書」の「安全に関する一般的な情報」及び「安全に使うための表示と図記号」を熟読し、遵守すること。

**【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管 (非包装 (非梱包) 状態)
温度: 10°C~40°C¹⁾
湿度: 10%~95% (結露なきこと)
気圧: 700hPa~1060hPa

- 1) 本機器は、ISO 15004-1 の保管温度条件を満たしておりません。温度が 40 °C よりも高くなる場所や、10 °C よりも低くなる場所に本機器を保管しないでください。

2. 貯蔵・保管 (包装 (梱包) 状態)

温度: -20°C~50°C

湿度: 10%~95%

3. 輸送 (包装 (梱包) 状態)

温度: -40°C~70°C

湿度: 10%~95%

4. 保管場所については次の事項に注意すること。

- (1) 水のかからない場所に保管すること。
- (2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオン分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
- (3) 傾斜、振動、衝撃 (運搬時を含む) など安定状態に注意すること。
- (4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

5. 耐用期間

正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから 8 年 (自己認証 [当社データ] による)。

**【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

項目	点検時期	点検内容
点検	使用前	構成部品が確実に取り付けられていること。
クリーニング	汚れた時	・接眼鏡

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社 トプコン
TEL 03-3558-2506

取扱説明書を必ずご参照下さい