

機械器具（22）検眼用器具  
一般医療機器 細隙灯顕微鏡 JMDN コード 35148000

「スリットランプSL-D2」

「スリットランプSL-D4」

「スリットランプSL-D4Z」

「スリットランプSL-D7」

「スリットランプSL-D8Z」


「スリットランプSL-D701」の付属品

患者用グリップ PG-1

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 1. 構成

本品は、患者用グリップ 2個1組で構成される

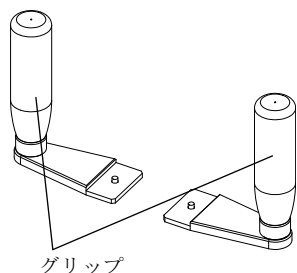

##### 【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

使用前に本品が確実に取り付けられていることを確認すること。  
（ガタつき、外観に傷等の異常がないことを確認すること。）

##### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 トプコン

製造業者

株式会社 トプコン山形

##### 2. 体に接触する部分の組成

グリップ：ポリアミド樹脂

##### 3. 寸法及び質量

寸法：40mm(W) × 89mm(D) × 113mm(H)

質量：117g

本品は、以下販売名の品目の付属品である。

スリットランプ SL-D2

（医療機器届出番号 13B1X0003000SLD2）

スリットランプ SL-D4

（医療機器届出番号 13B1X0003000SLD4）

スリットランプ SL-D4Z

（医療機器届出番号 13B1X000300SLD4Z）

スリットランプ SL-D7

（医療機器届出番号 13B1X0003000SLD7）

スリットランプ SL-D8Z

（医療機器届出番号 13B1X000300SLD8Z）

スリットランプ SL-D701

（医療機器届出番号 13B1X00030SLD701）

#### 【使用目的又は効果】

患者が検査を受ける際に、握るグリップ。

#### 【使用方法等】

＜使用環境＞

温度：10℃～40℃

湿度：30%～90%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa

＜使用方法＞

本品をスリットランプのあご受けベース板の裏からネジで固定する。

#### 【使用上の注意】

基本的注意事項

本品が確実に取り付けられていること。

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

取扱説明書を必ずご参照下さい