

機械器具(22) 検眼用器具
一般医療機器 細隙灯顕微鏡 (35148000)


「スリットランプ SL-D2」
「スリットランプ SL-D4」
「スリットランプ SL-D4Z」
「スリットランプ SL-D7」
「スリットランプ SL-D8Z」
「スリットランプ SL-2G」の付属品 ※※
ビームスプリッター

※※【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は、ビームスプリッターのみで構成される。

ビームスプリッター IN/OUT レバー

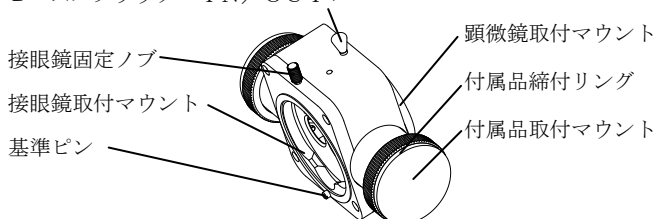

2. 寸法: 135mm(W)×52mm(D)×92~115mm(H)

3. 使用環境

温度: 10°C~40°C

湿度: 30%~90% (結露なきこと)

気圧: 700hPa~1060hPa

本品は販売名

スリットランプ SL-D2

(医療機器届出番号 13B1X0003000SLD2)

スリットランプ SL-D4

(医療機器届出番号 13B1X0003000SLD4)

スリットランプ SL-D4Z

(医療機器届出番号 13B1X0003000SLD4Z)

スリットランプ SL-D7

(医療機器届出番号 13B1X0003000SLD7)

スリットランプ SL-D8Z

(医療機器届出番号 13B1X0003000SLD8Z)

スリットランプ SL-2G

(医療機器届出番号 13B1X0003000SL2G)

の付属品である。

※※【使用目的又は効果】

顕微鏡部に組み合わせ、観察光を分割するために用いる。

※※【使用方法等】

＜使用方法＞

1. スリットランプに本品を取り付けます。
2. 本品にTV アタッチメント等を取り付けます。
3. 本品のレバー操作により、ビームスプリッターの IN/OUT T を切り替えることができます。

※※【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

しばらく使用しなかった機器を再使用する時には、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。

※※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 トプコン

TEL 03-3558-2506

取扱説明書を必ずご参照下さい