** 2026 年 10 月（第 4 版）
＊ 2022 年 10 月（第 3 版）
認証番号：225AIBZX00001000

機械器具 47　注射針及び穿刺針
管理医療機器　歯科用注射針（12740000）

歯科用デンツプライ注射針

再使用禁止

【警告】
- 本品を穿刺中に抵抗を感じた場合、無理な力で操作をしないこと。また、穿刺中に針の曲がり等異常を感じた場合は、使用を中止すること。［針の曲がり・折れの原因となる。］


【禁忌・禁止】

〈使用方法〉
- 再使用禁止

〈適用対象（患者）〉
- 発疹、皮膚炎などの過敏症既の往歴のある患者には使用しないこと。
- 針を折り曲げて使用しないこと。［針の曲がり･折れの原因となり、針が体内に残留する恐れがあるため。］
- 33G、31Gは、伝達麻酔には使用しないこと。［針管が細いため、針の曲がり･折れの原因となり、針が体内に残留する恐れがあるため。］

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

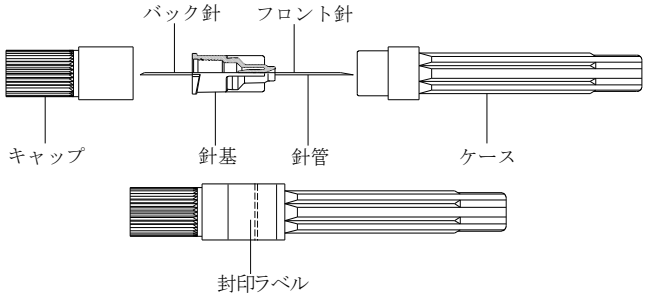

2. 寸法

針管外径	フロント針長さ	針基の色
0.26 ㎜（33G）	12 ㎜	ホワイト
0.26 ㎜（33G）	14 ㎜	
0.28 ㎜（31G）	12 ㎜	ピンク
0.28 ㎜（31G）	15 ㎜	
0.30 ㎜（30G）	21 ㎜	ブルー
0.30 ㎜（30G）	25 ㎜	
0.40 ㎜（27G）	21 ㎜	ブラウン
0.40 ㎜（27G）	30 ㎜	

3. 原材料
針管：JIS G 4305 SUS 304、針基：ポリプロピレン(PP)

【使用目的又は効果】
局所麻酔用の歯科用カートリッジ注射筒に装着して使用する。

【使用方法等】
- ケースとキャップをお互い逆方向にねじり封印ラベルを破ります。
- バック針のキャップを真っ直ぐ取り外し、そのままの状態で針基を注射器にねじ込み固定します。
- 本品は、インチネジ式及びロック式のカートリッジ型注射器に対応でき、ロック式注射器と併用する場合は、1/2 回転で装着します。
- 注射針に残ったケースを真っ直ぐ取り外して使用します。

〈使用方法に関連する使用上の注意〉
- 封印ラベルを必ずお互い逆方向にねじり破って、キャップを真っ直ぐ外すこと。［折るように封印ラベルを破ってキャップを取り外すと、注射針がケースから外れて落ちたり曲がる恐れがある。］
- ケースを外すとき、針先がケースに触れないように注意すること。［刃先が変形し、穿刺しづらくなる場合がある。］
- 麻酔液が針先から注出できることを確認後使用すること。そうでない場合は使用を中止すること。［本品を注射器に装着する際に、カートリッジのゴム片を切り落として針が詰まったり、針がカートリッジのゴムを貫通していない場合や、又は異物により詰まったりする場合がある。］
- 長期間薬液に接触させたまま放置しないこと。［針管の腐食･詰りの原因となる。］
- 強く圧力をかけずに、ゆっくりと注射すること。［強圧注射は組織の損傷や、カートリッジの破損及び液漏れの原因となることがある。］
- 電動注射器への使用の際は、手振れと強圧注射に注意すること。［針管が折れる可能性がある。また、組織が損傷する可能性がある。］
- 使用時及び使用後リキャップする場合は、術者の手指等への誤刺を防止のため、保護具等を使用するか、ケースを手で持たずに台等に置いて、ケースを真っ直ぐに被せること。［ケースを傾けて被せると、針がケースを貫通する恐れがある。］
- 針が見えなくなるまで深く穿刺しないこと。［針基の付け根に過剰な負荷がかかり、針の曲がり・折れの原因となり、針が体内に残留する恐れがあるため。］
- 注射器に取り付ける際は、ケースで針基に過剰な回転負荷をかけないこと。［針基が破損する、または注射器破損の恐れがあるため。］

**【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉
- 本品は滅菌済みのため、使用直前に封印ラベルを開封し注射器に装着すること。
- 本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 33G は大臼歯には使用しないこと。［針管が細いため、針の曲がり・折れの原因となり、針が体内に残留する恐れがあるため。］

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉
- 水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

〈使用期限〉
本品は包装に記載の使用期限までに使用すること。(記載の使用期限は自己認証による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元及び製造元：
栃木精工株式会社
TEL：0282-27-1133

＊ 販売元：
デンツプライシロナ株式会社
〒104-0061 東京都中央区銀座八丁目 21 番 1 号
住友不動産汐留浜離宮ビル

＊ お問い合わせ窓口：
デンツプライシロナ株式会社
カスタマーサービス
TEL 番号：0120-789-123