

医療用品(3)手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000


トップ PVCメディカルグローブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 本品は歯科用手袋ではないため、歯科用として使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

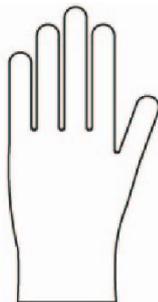

- 左右兼用タイプ(平手タイプ)
- 未滅菌
- パウダなし
- 表面仕上げ:全表面が平滑な手袋
- 本品はポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジイソノニル、テレフタル酸ジオクチル、2,2,4-トリメチル-1,3-ペンタンジオールジソブチレート)を使用している。

(仕様)

本品は、以下の規格を準拠する。

- EN 455-1(Medical gloves for single use. Requirements and testing for freedom from holes)
- EN 455-2(Medical gloves for single use. Requirements and testing for physical properties)
- EN 455-3(Medical gloves for single use. Requirements and testing for biological evaluation)

【使用目的又は効果】

- 手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う際に、患者及び使用者を交差感染から守るために使用すること。

【使用方法等】

- 箱のミシン目を切り取る。
- 1枚ずつ箱より取り出し、手に装着する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴が開いたりすることがあるので注意すること。
- 体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあるので、異常を感じたら使用しないこと。
- この手袋は60℃以上の熱いものに触れさせないこと。手袋の素材であるポリ塩化ビニルは高い熱により破損する可能性がある。

<相互作用(他の医薬品・医療機器との併用に関する事)>

- 薬品、薬液等によっては膨潤したり、浸透したりする場合があるので確認して使用すること。
- 油脂により材質が劣化する場合があるので確認して使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管の条件>

- 水ぬれに注意して保管すること。高温又は湿度の高い場所や、直射日光の当たる場所には保管しないこと。
- X線を避け、箱包装のまま保管すること。

<有効期間>

- 内箱の使用期限欄を参照のこと。[自己認証(自社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社トップ(添付文書の請求先)
TEL 03-3882-3101

