

医療用品(3)手術用手袋及び指サック  
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000

# トップ ニトリルメディカルグローブ

## 再使用禁止


### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 本品は歯科用手袋ではないため、歯科用として使用しないこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社トップ(添付文書の請求先)  
TEL 03-3882-3101

### 【形状、構造及び原理等】

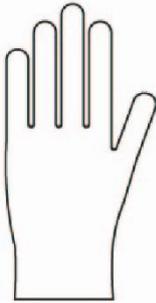

- 左右兼用タイプ(平手タイプ)
- 未滅菌
- パウダなし
- 表面仕上げ:表面の一部が粗面の手袋
- 本品はニトリルゴムを使用している。

### (仕様)

本品は、以下の規格を準拠する。

- EN 455-1(Medical gloves for single use. Requirements and testing for freedom from holes)
- EN 455-2(Medical gloves for single use. Requirements and testing for physical properties)
- EN 455-3(Medical gloves for single use. Requirements and testing for biological evaluation)

### 【使用目的又は効果】

- 手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う際に、患者及び使用者を交差感染から守るために使用すること。

### 【使用方法等】

- 箱のミシン目を切り取る。
- 1枚ずつ箱より取り出し、手に装着する。

### 【使用上の注意】

#### <重要な基本的注意>

- 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴が開いたりすることがあるので注意すること。
- 体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあるので、異常を感じたら使用しないこと。

#### <相互作用(他の医薬品・医療機器との併用に関する事)>

- 薬品、薬液等によっては膨潤したり、浸透したりする場合がありますので確認して使用すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### <保管の条件>

- 水ぬれに注意して保管すること。高温又は湿度の高い場所や、直射日光の当たる場所には保管しないこと。
- オゾン及びX線を発生させる機器の近くを避け、箱包装のまま保管すること。

#### <有効期間>

- 内箱の使用期限欄を参照のこと。[自己認証(自社データ)による]

