2020 年 5 月 1 日作成(新様式第 2 版)　　医療機器届出番号:43B2X10006000016

添付文書

医療用品(4)整形用品　JMDN コード 31071000

一般医療機器　皮膚バリア粘着プレート　**シリコーンゲルシート**

【禁忌・禁止】

次の部位には使用しないでください。

・治療中の傷口(開いている傷口)

・感染や炎症がみられる異常な皮膚病変部位


・抜糸前の縫合創

【形状、構造及び原理等】

1, 概要

家庭用又は医療用の衛生材料である。

2, 形状、構造

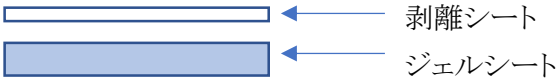

3, 原材料

剥離シート:CPP

ジェルシート:ポリウレタン、シリコーンジェル

4, 原理

本品を外傷、熱傷、手術等のあと、もしくは健常皮膚へ貼付することにより、外部からの汚染物質や物理刺激からの保護を図る。

5, 寸法

粘着テープ:2cm×15cm

6cm×12cm

12cm×15cm

【使用目的又は効果】

外部の汚染物質、物理刺激からの皮膚保護

【操作方法又は使用方法等】

1, 貼付方法

① 貼る前に適用部位をよく洗い、よく乾かしてください。

② 透明な剥離テープを剥がし、粘着面を適用部位に貼り付けてください。

③ ひじ、ひざなど固定しにくい部位に使用する際は包帯やテープなどで固定してください。

2, 再使用する場合

① 本品を皮膚から剥がして中性洗剤で洗い、清潔なぬるま湯でよくすすいでください。

② 本品を洗ったあとは、シートを軽く振り水滴を落とし、ほこりやちりが少ないところで自然乾燥させてください。

③ 洗浄後ティッシュやタオルで粘着面を拭くと、固着することがあるためおやめください。

④ 1 日 2 回を目安に洗浄してください。夏季など汗をかきやすい場合は頻繁に洗浄し、適用部位を清潔に保ってください。

⑤ 洗浄しても汚れが落ちなくなり、粘着が弱くなった場合は新しい製品と交換してください。通常 14～28 日間使用できますが、洗浄回数や適用部位により短くなる場合があります。

【使用上の注意】

① 治療中の傷口には使用しないでください。

② 明らかに感染を有している部位には使用しないでください。

③ 使用中、発疹・発赤、かゆみ、痛み等のかぶれの症状があらわれた場合には使用を中止して医師又は薬剤師に相談してください。

④ 皮膚刺激の原因になりますので、シートを引っ張った状態では貼らないでください。

⑤ シートをはがす際は、皮膚を押さえながらゆっくりはがしてください。

⑥ シートの洗浄の際は、皮膚の炎症や刺激を惹起する洗剤を使用しないでください。

⑦ 軟膏やクリーム等との併用は避けてください。

⑧ 外用にのみ使用してください。

【保管方法及び有効期間等】

1, 保管方法

① 直射日光、高温多湿を避けて保管してください。

② 小児の手の届かない所に保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者　トイメディカル株式会社

〒861-3131

熊本県上益城郡御船町豊秋 750-1

TEL:096-281-0007

製造者　株式会社上村エンタープライズ

メディカル事業部

〒869-1219

熊本県菊池郡大津町大字大林 1017 番地の 1