2017年 6月改訂（第5版）（新記載要領に基づく改訂）
2010年 7月改訂
医療機器承認番号:15700BZZ00513000


機械器具 47 注射針及び穿刺針
管理医療機器　歯科用注射針　12740000

# ＤＥＮＴＣＲＡＦＴデンタル針

再使用禁止

**【禁忌･禁止】**
1. 再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】**
1. 形状・構造
本品は、歯科において局所麻酔用あるいは伝達麻酔用として用いられる滅菌済み歯科用ディスポーザブル注射針である。本品は、針管、針基、プロテクタ、保護キャップからなる。

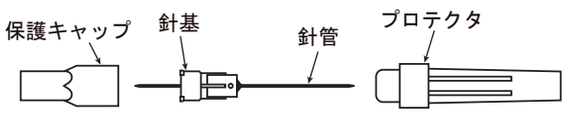


2. 材質
針管：ステンレス鋼

**【使用目的又は効果】**
本品は滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できる。

**【使用方法等】**
1. プロテクタを回し封紙を切り、保護キャップを外します。
2. 針基を注射筒等にねじ込み固定します。
3. プロテクタを抜き取り使用します。

**＜使用方法等に関連する使用上の注意＞**
1. 誤って手指等に針を刺さないよう取扱いには十分注意してください。
2. 針基を注射筒等に固定する際は、針管に直接手を触れないように、プロテクタをつけたままの状態で針基を注射筒等にねじ込んでください。
3. 針基と注射筒等は使用直前に接続してください。
4. 針管に過剰な負荷をかけたり、プロテクタを外す際に針先がプロテクタに触れないよう注意してください。［針先変形のおそれがあります。針先が変形した場合は、本品を新しいものと交換してください。］
5. リキャップしないでください。［リキャップ自体に誤穿刺のおそれがあり、また、誤って斜めにリキャップすることで、針先がプロテクタを貫通するおそれがあります。］

**【使用上の注意】**
1. 重要な基本的注意
1)針先のめくれ等が発生した場合は使用を中止すること。
2)針管を繰り返し折り曲げて使用する際は十分に注意すること。［針管破損のおそれがある。］
3)針管を注射筒等に固定する際にカートリッジのゴム片を切り落とし、針管が詰まることがあるので試射等で確認すること。
4)薬液の吸引後は直ちに使用すること。［針管腐食のおそれがある。］

**【保管方法及び有効期間等】**
1. 保管方法
水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間
包装の使用期限欄を参照のこと。
有効期間：滅菌後3年（自己認証による）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**
製造販売（お問い合わせ先）
ニプロ株式会社
電話番号：06-6372-2331（代表）

製造
ニプロ医工株式会社

販売
株式会社ヨシダ

針先注意
処置後の誤刺注意

NIPRO　ニプロ株式会社