2017年 6月改訂（第3版）（新記載要領に基づく改訂）
2005年12月改訂
医療機器承認番号:15900BZZ01054000


機械器具 47 注射針及び穿刺針
管理医療機器　造影剤注入用針　44127030
（単回使用一般静脈用翼付針　70378000）

ニプロＲＩアンジオセット

再使用禁止

【禁忌・禁止】
1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
1. 形状・構造
本品は、心臓疾患の核医学検査に用いるラジオアイソトープを血管内に注入するときに使用するディスポーザブルの翼付針である。

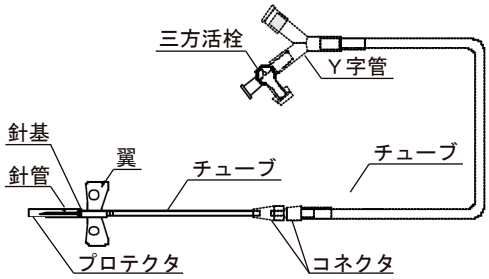

2. 材質
針　　管：ステンレス鋼
針　　基：ポリ塩化ビニル
チューブ：ポリ塩化ビニル
三方活栓：ポリカーボネート、ポリエチレン
Ｙ 字 管 ：ポリ塩化ビニル、イソプレンゴム
コネクタ：ポリ塩化ビニル、ポリカーボネート
本品はポリ塩化ビニルに可塑剤（フタル酸ジ-2-エチルヘキシル）を使用している。

【使用目的又は効果】
本品は滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できる。

【使用方法等】
1. 包装を開封して、本品を取り出し、三方活栓のコネクタに薬液の入った注射筒等を接続します。
2. 薬液をチューブ内に満たし、針管の先端より流出させ、チューブ内の空気を完全に抜きます。
3. プロテクタを外し、翼をつまんで静脈に穿刺します。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞
1. 誤って手指等に針を刺さないよう取扱いには十分注意してください。
2. リキャップしないでください。［リキャップ自体に誤穿刺のおそれがあり、また、誤って斜めにリキャップすることで、針先がプロテクタを貫通するおそれがあります。］

【使用上の注意】
1. 重要な基本的注意
1)高圧注入には使用しないこと。［破損のおそれがある。］
2)脂溶性の医薬品ではポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ-2-エチルヘキシルが溶出するおそれがあるので注意すること。
3)使用中は本品の破損、接続部の緩み、液漏れ及び詰まり等について定期的に確認すること。
4)脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油等の油性成分、界面活性剤又はアルコール等の溶解補助剤等を含む医薬品を投与する場合及びアルコールを含む消毒剤を使用する場合は、ひび割れに注意すること。［薬液により三方活栓及びコネクタ等にひび割れが生じ、薬液漏れ及び空気混入等の可能性がある。なお、過度な締め付け及び増し締め等は、ひび割れの発生を助長する要因となる。］
5)ひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と交換すること。
6)本品を静脈に穿刺及び抜去する際は慎重に行い、無理に行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】
1. 保管方法
水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿及び殺菌灯等の紫外線を避けて保管すること。

2. 有効期間
包装の使用期限欄を参照のこと。
有効期間：滅菌後3年（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売（お問い合わせ先）
ニプロ株式会社
電話番号：06-6372-2331（代表）

製造
ニプロ医工株式会社

針先注意
処置後の誤刺注意

NIPRO　ニプロ株式会社