機械器具47　注射針及び穿刺針
一般医療機器　　通気針　　70199000


通　気　針

（日本製薬専用エアー針）

再使用禁止

【禁忌・禁止】
1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
1. 形状

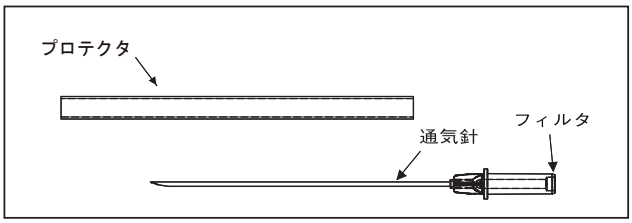

通気針の形状・構造

2. 材質
針管：ステンレス鋼

【使用目的又は効果】
本品は、輸液瓶等から輸液する際、瓶内に通気されるために使用する針である。チューブ及びフィルタ付きもある。

【使用方法等】
1. 製剤バイアルに点滴チューブの針を刺し、バイアルを逆さまにつるしてください。
2. 本品のフィルタの部分を指で蓋をした状態のまま、本品を製剤バイアルに差し込み、フィルタ部分の指先を放してください。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞
1. 誤って手指等に針を刺さないよう取扱いには十分注意すること。
2. プロテクタを外すときは、針先がプロテクタに触れないよう注意してください。［プロテクタが針に触れると、針先が変形し、穿刺しづらくなるおそれがあります。］

【使用上の注意】
1. 重要な基本的注意
1) 本品に過度の負荷をかけないよう注意すること。［本品又は栓が破損し、液漏れ等が発生するおそれがある。］
2) 本品は合成樹脂製品のため、温度が低下するにつれて強度が低下することから取扱いには注意すること。［破損するおそれがある。］
3) リキャップしないこと。［リキャップ自体に誤穿刺のおそれがあり、また、誤って斜めにリキャップすることで、針先がプロテクタを貫通するおそれがある。］

2. 不具合・有害事象
1) その他の不具合
・誤穿刺　　・針の曲がり、変形
・針基の破損　　・コアリング
・液漏れ

2) その他の有害事象
・刺し傷

【保管方法及び有効期間等】
1. 保管方法
水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間
包装の使用期限欄を参照のこと。
有効期間：滅菌後4年（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売
ニプロ株式会社
電話番号：06-6372-2331（代表）

製造
ニプロ医工株式会社

NIPRO　ニプロ株式会社