
機械器具 47 注射針及び穿刺針
一般医療機器　針ガード　17812000
（単回使用ニードルリキャップ器　36187000）

針ガードＮＰ

再使用禁止


【禁忌･禁止】
1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

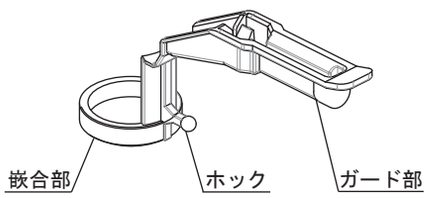


【使用目的又は効果】
廃棄時の針刺し事故を防止するため、使用後の針に被せるキャップである。

【使用方法等】
1. 従来法により、プレフィルドシリンジ製剤による投与を行います。
2. ガード部を固定するホックを取り外します。

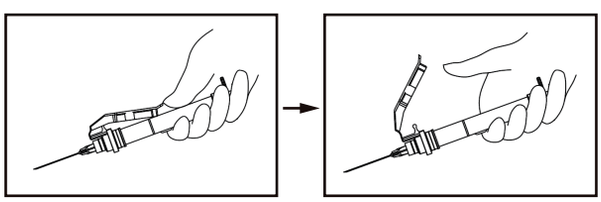

3. プレフィルドシリンジ製剤のバレルを把持した状態で、机の端等にガード部を当て、注射針をゆっくりガード内に押し込みます。

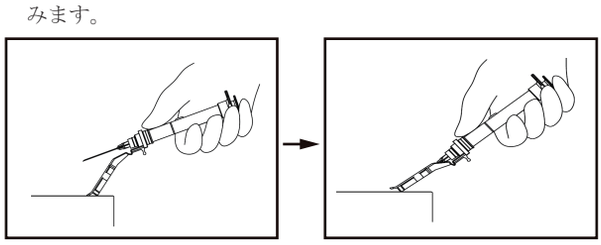

4. 使用後は感染防止に留意し、安全な方法で廃棄します。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞
1. ガード部を針管に被せる際には、針刺しに注意して使用方法3.に従って行ってください。
2. ガード部の機構が正常に作動しなかった場合や作動時に破損した場合は、針刺しに注意し速やかに廃棄してください。
3. ガード部を針管に被せた後は、ガード部に触れないようにしてください。

【使用上の注意】
1. 重要な基本的注意
1)本品は合成樹脂製品のため、温度が低下するにつれて強度が低下することから取扱いには注意すること。［製品が破損するおそれがある。］

2. 不具合・有害事象
1)その他の不具合
(1)破損
(2)動作不良

【保管方法及び有効期間等】
1. 保管方法
水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間
包装の使用期限欄を参照のこと。
有効期間：5年（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売（お問い合わせ先）
ニプロ株式会社
電話番号：06-6375-6709

製造
株式会社梁瀬産業社

NIPRO　ニプロ株式会社