＊＊2023 年 3 月 （第 3 版）
＊2016 年 1 月 28 日（第 2 版）

医療機器認証番号　20600BZZ00961000

機械器具 58　整形用機械器具

管理医療機器　能動型手用他動運動訓練装置（17137002）

特定保守管理医療機器　**ロムーバー**　の付属品

グローブ 右 L　A7039、グローブ 左 L　A7039、グローブ 右 S　A7039、グローブ 左 S　A7039

【警告】

・本機器の取扱い者は、医師の処方に従ってください。


・患者が、骨粗しょう症やリウマチ性疾患など、筋、骨格系に関わる疾患を持っている場合は、使用前に医師に相談してください。また、使用する際には圧力設定に注意し、痛みなど自覚症状を訴えなくても低い圧力で使用し、安全を確認してください。

・患者が疼痛、異常感覚、不快感を訴えた場合は、使用を中止し、医師に相談してください。

【禁忌・禁止】

患手に化膿巣、出血、火傷、炎症などがある患者には使用しないでください。病巣をひろげたり、循環系を介して病原菌などを伝搬したりする危険があります。

【形状・構造及び原理等】

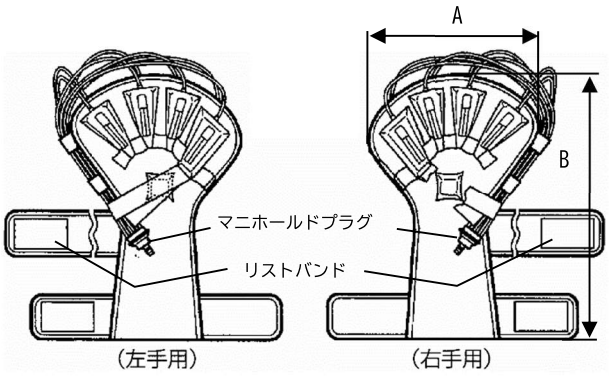

グローブ （材質：ウレタン合皮）	A 寸法	B 寸法
L サイズ	267mm	420mm
S サイズ	240mm	370mm

＊＊＜使用環境条件＞

周囲温度 10～40℃、湿度 30～75%（結露なきこと）

気圧 70～106kPa

＊＊【使用目的又は効果】

関節の癒着・拘縮の予防及び関節可動域の改善を行うこと。

＊【使用方法等】

＊＊＜組み合わせて使用する医療機器＞

販売名	認証番号
ロムーバー	20600BZZ00961000

1. 電源スイッチを“切”、圧力調節ツマミを最低の圧力状態にし、電源プラグをコンセント（AC100V）に差し込む。
2. 電源スイッチを“入”にする。
3. グローブを患手に装着する。
4. ホースを本体とグローブに接続する。
5. 時間設定スイッチで使用時間の設定、加圧時間設定ツマミでグローブの加圧時間の設定をする。
6. 始動スイッチを押し、圧力調節ツマミを徐々に患手に適合した圧力へ調節する。
7. 時間設定スイッチで設定された時間になると、停止しブザーが鳴ります。
8. 停止したら、圧力調節ツマミを最低の圧力状態に戻す。又、本体の使用を終了する場合は、電源スイッチを“切”にする。

＊＊【使用上の注意】

重要な基本的注意

（1）　使用前の注意事項

- 取扱説明書に従って、本体、グローブ、ホースの各部が正常かつ安全に作動することを確認すること。
- 電源プラグは AC100V の電源コンセントに確実に差し込むこと。
- リストバンドは強く巻き付けないこと。
- ホースは折り曲げたり、重い物を載せたりしないこと。
- 圧力調節ツマミは、最低の圧力状態にしてから始動し、徐々に患手に適合した圧力へ調節すること。

取扱説明書を必ずご参照ください。

(2) 使用中の注意事項

- マニホールドプラグを外した状態で、ホースのソケットを耳、目、鼻、口などに当てないこと。
- 本体に患者を触れさせないこと。
- 使用中はグローブ装着部位の状態を確認し、発赤、かぶれ、疼痛等の異常がみられたときは直ちに使用を中止し、適切な処置を行なうこと。

(3) 使用後の注意事項

- 圧力調節ツマミを最低の圧力状態に戻すこと。
- 本体の使用を終了する場合は電源スイッチを“切”にすること。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って抜くこと。

【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意し、直射日光の当たる場所や温度、湿度の高い場所を避けて保管のこと。

＊＊保管の条件：周囲温度-10～60℃、湿度 10～95％（結露なきこと）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売元　日東工器株式会社

〒146-8555 東京都大田区仲池上 2-9-4

TEL 03-3755-1111（代表）

FAX 03-3755-5294

製造元　栃木日東工器株式会社