**2024年　8月 改訂(第8版)
*2020年 11月 改訂(第7版)

医療機器届出番号:35B1X00001000003

機械器具 47 注射針及び穿刺針
一般医療機器 歯科用貼薬針 70679000
(一般医療機器 歯科用注入器具 70718000)

ニシカスピン

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】


材　質:ポリプロピレン
先端径:φ0.6mm(23G相当)

【使用目的】

口腔内(歯周ポケット内、根管内等)の貼薬を行う。


【使用方法等】

本品は、ロック式のシリンジに取り付けて使用してください。
本品はプラスチックニードルです。折り曲げて使用する場合は、下図のように一度深く折り曲げた後(3秒ほど指で固定し)、戻してください。

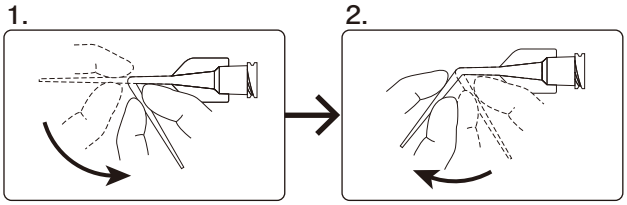

*[使用方法等に関連する使用上の注意]

・本品は、1回限りの使用とすること。
・下図のグレー部分では折り曲げないこと。破折、狭窄するおそれがある。

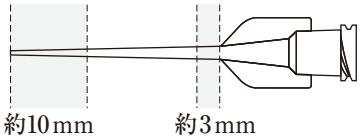

・本品と適合しないシリンジには装着しないこと。
《当社適合製品》

販売名	承認番号等
カルシペックスⅡ	21500BZZ00486000
カルシペックスプレーンⅡ	21500BZZ00487000

・本品はシリンジとの接合部に緩みがないようにロックすること。ロックされていないと、注入時にはずれる場合がある。
・軽い力で押しても薬液が出にくい場合は、本品を交換し、薬液が出ることを確認のうえ、使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

・直射日光を避けて涼しい場所で保管すること。
・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[有効期間]

本品は包装に記載の使用期限までに使用すること。
〔記載の使用期限は自己認証(当社データ)による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**[製造販売元] 日本歯科薬品株式会社
〒750-0025 山口県下関市竹崎町4-7-24
0120-8020-96／FAX 083-222-2220
[ホームページ] https://www.nishika.co.jp/

製造販売元
日本歯科薬品株式会社
山口県下関市竹崎町4-7-24