** 2024年 8月 改訂(第8版)
* 2020年 11月 改訂(第7版)

医療機器届出番号:35B1X00001000004

機械器具47 注射針及び穿刺針
一般医療機器 歯科用貼薬針 70679000
(一般医療機器 歯科用注入器具 70718000)

# ニシカスピン「ペリオ」


**再使用禁止**

**【禁忌・禁止】**
再使用禁止

## 【形状・構造及び原理等】
材　質:ポリプロピレン
先端径:0.8mm

## 【使用目的】
口腔内(歯周ポケット内、根管内等)の貼薬を行う。

## 【使用方法等】
本品は、歯科用注入器具[販売名:ニシカシリンジ「ペリオ」(届出番号:35B1X00001000005)]に取り付けて、これに適合する歯科材料・薬剤の容器を装填して使用します。

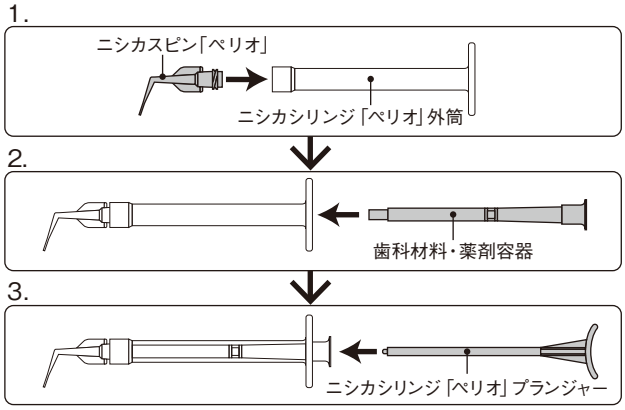


*[使用方法等に関連する使用上の注意]
・本品は、1回限りの使用とすること。
・本品と適合しないシリンジには装着しないこと。
・本品はシリンジとの接合部に緩みがないようにロックすること。ロックされていないと、注入時にはずれる場合がある。
・軽い力で押しても薬剤が出にくい場合は、本品を交換し、薬剤が出ることを確認のうえ、使用すること。
・付属のニードルキャップは、使用中の一時置き等、薬剤の漏出が懸念される場合に装着すること。一度使用したニードルキャップは廃棄すること。

## 【保管方法及び有効期間等】
[保管方法]
・直射日光を避けて涼しい場所で保管すること。
・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[有効期間]
本品は包装に記載の使用期限までに使用すること。
〔記載の使用期限は自己認証(当社データ)による〕

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
**[製造販売元] 日本歯科薬品株式会社
〒750-0025 山口県下関市竹崎町4-7-24
0120-8020-96／FAX 083-222-2220
[ホームページ] https://www.nishika.co.jp/

製造販売元
日本歯科薬品株式会社
山口県下関市竹崎町4-7-24