*2022 年 4 月改訂(第 2 版)
2018 年 1 月作成(第 1 版)

医療機器届出番号　22B1X00007KD011A


機械器具(51)　医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器　瘻孔留置チューブ交換器具　JMDN コード：70229000

カンガルー　オブチュレーター

再使用禁止

【禁忌・禁止】
1. 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】
1. 形状・構造等

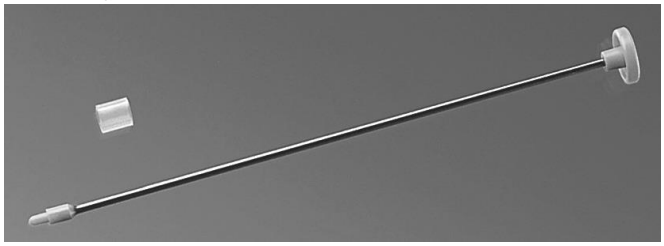

本品は留置された胃瘻チューブ(カンガルーPEGチューブ等(別売))の交換を行うため、チューブに挿入して使用するもので、5.3mm(16Fr)用及び6.7mm(20Fr)用がある。

2. 原材料
オブチュレーター：ステンレス鋼

3. 仕様等
先端部とシャフトの接合強度：88N(20[lbf.])の荷重をかけたとき抜けない。
把持部(ノブ)とシャフトの接合強度：88N(20[lbf.])の荷重をかけたとき抜けない。

【使用目的又は効果】
瘻孔に留置した器具を抜去又は挿入する際に、器具を保持するために補助的に使用する。

【使用方法等】
瘻孔チューブの内部管腔にオブチュレーターを入れて挿入および除去を行う。
1. オブチュレーターを挿入し体内保持具を細長くする(伸長する)。
2. 保持具の径を小さくし、瘻孔チューブを抜去・挿入する。

【使用上の注意】
1. 重要な基本的注意
(1) 本品は、単回使用製品であり、1 回限りの使用で使い捨て、再使用しないこと。
(2) 包装の水濡れしたものは使用しないこと。
(3) 包装を開封したら、速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】
1. 保管方法
高温、多湿、直射日光及び水濡れを避けて室温で保管すること。

2. 有効期間
外装表示参照

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
*製造販売業者：カーディナルヘルス株式会社
カスタマーサポートセンター：0120-917-205