

高度管理医療機器

機械器具 (31) 医療用焼灼器

汎用冷凍手術ユニット


JMDNコード:11067000

『メドトロニック CryoConsole』の付属品 Nitron リモート

【形状・構造及び原理等】

【構成品及び種類】

Nitron コンソール(タイプ 2)に接続し、ボタンにより基本的な操作を行う。

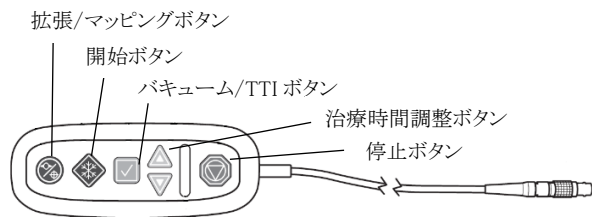

ケーブル長:3m、長さ 18.3cm、幅 7.1cm

【使用目的又は効果】

本品は、不整脈の治療に使用する冷凍アブレーションカテーテル専用の冷凍手術装置である。

【使用方法等】

- 1) Nitron リモートのケーブルをコンソール正面のコネクションパネルにあるリモートポートに接続する。
- 2) Nitron リモートを適切な場所に設置する。
- 3) その後の手技上での使用方法是コンソールの使用方法に従う。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- 1) 湿らせた布で本品を拭く。必要に応じて、中性洗剤又はイソプロピルアルコールを使用する。
その際、本品を浸さず、コネクタに液体や水分が入らないようにすること。コネクタが濡れると、接続されたデバイスが正しく機能しない場合がある。また、強力な溶剤で洗浄しないこと。本品が損傷する場合がある。
- 2) 本品をよく乾かすこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 日本メドトロニック株式会社
カスタマーサポートセンター 0120-998-167

製造業者: メドトロニック社 (米国)
[Medtronic, Inc.]

取扱説明書を必ずご参照ください。