

高度管理医療機器

機械器具 (31) 医療用焼灼器

汎用冷凍手術ユニット

JMDNコード:11067000

『メドトロニック CryoConsole』の付属品 同軸アンビリカルケーブル


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
 - 1) 再滅菌禁止
 - 2) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

[構成部品及び種類]

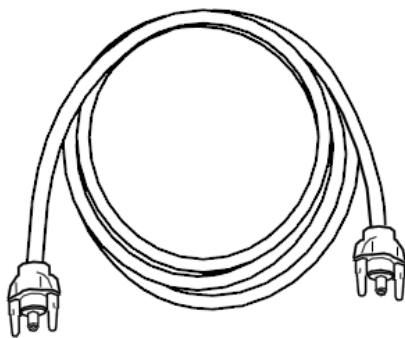

全長:1,829mm

【使用目的又は効果】

本品は、不整脈の治療に使用する冷凍アブレーションカテーテル専用の冷凍手術装置である。

【使用方法等】

- 1) 同軸アンビリカルケーブルを包装から取り出す。
- 2) 同軸アンビリカルケーブルを冷凍アブレーションカテーテルに接続する。
- 3) 同軸アンビリカルケーブルをコンソール正面のメス同軸コネクタに接続する。
- 4) 冷凍アブレーション終了後、同軸アンビリカルケーブルを冷凍アブレーションカテーテル及びコンソールから取り外す。

【保管方法及び有効期間等】

有効期間

有効期間は 2 年間。

有効期限については外装表示参照。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 日本メドトロニック株式会社
カスタマーサポートセンター 0120-998-167

製造業者: メドトロニック社 (米国)
[Medtronic, Inc.]

取扱説明書を必ずご参照ください。