
2026年11月作成（第1版）　　医療機器承認番号　30200BZX00403000

機械器具21　内臓機能検査用器具
高度管理医療機器　重要パラメータ付多項目モニタ　33586003

ヘモスフィア　アドバンスドモニタリングプラットフォーム(フロースルー注入液温度プローブ)

【形状・構造及び原理等】

モデル93522および93528（日本光電用）（フロースルー注入液温度プローブ）は、注入液供給デリバリーシステムと組み合わせて使用されます：モデル93610　閉鎖式注入液供給システム(CO-Setプラス室温用)、モデル93650　閉鎖式注入液供給システムの付属品（CO-Setプラス用シリンジ）またはモデル93505　閉鎖式注入液供給システムの付属品（CO-Setフロースルー・センサー)。フロースルー注入液温度プローブは、2つの抵抗器と1つのサーミスタから構成される3要素のネットワークで、線形抵抗対温度曲線を生成します。0℃～25℃の範囲における公称測定精度は±0.3℃です。フロースルー注入液温度プローブは、シリンジを用いてサーマルインジケータをカテーテルの近位ルーメンハブに注入する位置に配置されています。プローブがカテーテル内に導入されている場合、注入液温度を正確に測定することができます。

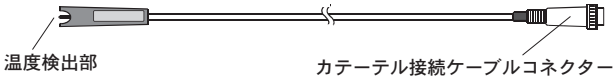

【使用目的又は効果】

本品は、熱希釈心拍出量、動脈圧心拍出量、血圧、静脈血酸素飽和度および組織酸素飽和度を測定し、各種生体情報の収集、監視を行うための多項目モニタである。さらに、非心臓手術において、測定された動脈圧波形と患者の身体的情報から、低血圧予測インデックスを表示する。観血的測定により低血圧予測インデックスを算出する際には、患者の動脈内に留置されたカテーテル等に接続して用いられる専用のセンサを使用する。非観血的測定により低血圧予測インデックスを算出する際には、患者の指に取り付けて用いられる専用のフィンガーカフを使用する。

【使用方法等】

本品は、「販売名　閉鎖式注入液供給システム　承認番号15800BZY00410000」と併用して使用します。対応する注入液供給システムに付属の取扱説明書（モデル93610　閉鎖式注入液供給システム（CO-Setプラス室温用)、モデル93650　閉鎖式注入液供給システムの付属品（CO-Setプラス用シリンジ）またはモデル93505　閉鎖式注入液供給システムの付属品（CO-Setフロースルー・センサー)）を参照してください。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

・プローブのコネクタ部は液体に浸さないよう注意してください。
・本品は未滅菌の状態で出荷されます。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

涼しく乾燥した場所に保管してください。
製品に表示されているUse By（使用期限）まで（自己認証による）

消毒

プローブを消毒する際は、イソプロピルアルコール等の消毒液でプローブを拭いてください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
電話番号：03-4415-6600
設計を行う外国製造業者（国名）：
ベクトン・ディッキンソン アンド カンパニー（米国）
Becton, Dickinson and Company

取扱説明書を必ずご参照ください。