**2020年　4月 改訂（第14版）（__部）
＊ 2018年　8月 改訂（第13版）
医療機器承認番号：21200BZZ00385A03

医療用品（４）　整形用品
医療機器分類　管理医療機器
一般的名称　透析開始・終了セット／単回使用クラスⅡ処置キット
JMDNコード　32142000／33961002

ＮＢＭ処置パック

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止。
・構成品の内、天然ゴム製手術用手袋に天然ゴムを使用しています。
天然ゴムは、かゆみ、発疹、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショック等のアレルギー性症状をまれに起こす事があります。この様な症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を施して下さい。

【形状・構造及び原理等】
本組合せ医療機器は、以下に示す構成品のうち、２品目以上の構成品を組合せて構成するが、組合せによって同梱されない構成品もある。なお、構成内容は別紙に記載する。

（構成品）

一般的名称	販売名	組成	用途（使用方法等）
医療用不織布	ＮＰガーゼ	綿/セルロース	創傷面の保護、血液・体液の吸収、及び薬剤の塗布等に用いる。
単回使用汎用サージカルドレープ	ＮＰドレープ	-	手術室や処置室の汚染(器具やテーブルの上)から外科切開部位や術野を隔離するために保護的なカバー又は障壁として用いる。
単回使用ピンセット	ピンセット	-	収納される構成品を用いて、創傷面の処置、被覆及び保護を行う際に用いる。
救急絆創膏	インジェクションパッド ＮＳ	不織布パッド/アクリル系粘着剤	＊ 穿刺部にパッドをあて周りのテープで固定する。
	チューシャバン ＮＳ		
	インジェクションパッドマイルド ＮＳ		
	ケアリーヴ ＮＳ		＊ 創部にパッド部分をあて周りのテープを伸ばさずに貼付する。
	オーキューバンエコ ＮＳ		
	カテリーパッドマイルド ＮＳ		＊ 創部にパッド部分をあて周りのテープで固定する。
	ステプティ ＮＳ	セルロース・レーヨン不織布/アクリル系粘着剤	＊ 1.針又はカテーテルを抜く直前に、パッド長径が血管の走行に一致する向きで血管刺入点にパッドを当て軽く仮止めする。 ＊ 2.パッドに軽く指をそえながら、針又はカテーテルを抜く。抜去と同時に、そえていた指でパッドを強めに圧迫する。 ＊ 3.パッドを圧迫しながら、片方ずつ粘着テープ部を1cm程度引き伸ばし、剥がれないよう皮膚に貼付する。 ** 4.皮膚刺激をできるだけ避けるため、貼付時間は２時間以内を目安にすること。
	ガードスティック ＮＳ	セルロース不織布/アクリル系粘着剤	＊ 創部にパッド部分をあて周りのテープを伸ばさずに貼付する。
手術用手袋	天然ゴム製手術用手袋	天然ゴム	手術、処置等に用いる場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。（パウダーフリー手袋）
	非天然ゴム製手術用手袋	プラスチック	
かん子	かん子	プラスチック/ステンレス	主に物をつかむ、抑える、牽引する事に用いる。
カテーテル被覆・保護材/救急絆創膏	カテリープＦＳタブ ＮＳ	アクリル系粘着剤	注射針又はカテーテル刺入部位に直接貼付してその固定に用いる。
付属品	綿棒	薬剤塗布等外科用処置に用いる。	
	止血用圧迫綿	穿刺部止血圧迫に用いる。	
	パッド	圧迫補助材及び穿刺針と皮膚の緩衝材に用いる。	
	綿球	薬剤塗布等外科用処置に用いる。	
	カット綿	薬剤塗布等外科用処置に用いる。	
	防水シーツ	外科用処置領域の汚染防止の為に用いる。	
	固定テープ	ガーゼ及び器具の皮膚への固定に用いる。	

【使用目的又は効果】


創面の処置、被覆及び保護

【使用方法等】

1. 形態１

(1) トレーから滅菌紙を剥がす。


(2) 収納されている品目を用いて、創面の処置、被覆及び保護を行う。

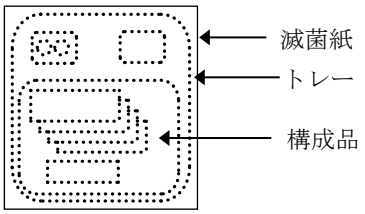

2. 形態２

(1) 滅菌袋を開封する。


(2) 収納されている品目を用いて、創面の処置、被覆及び保護を行う。

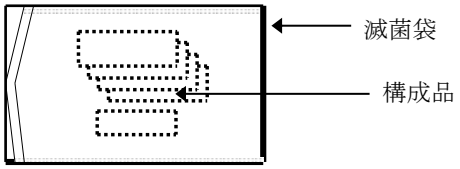

3. 形態３

(1) 滅菌袋を開封する。

(2) レーヨン紙で包んであるトレーから、収納されている品目を用いて、創面の処置、被覆及び保護を行う。

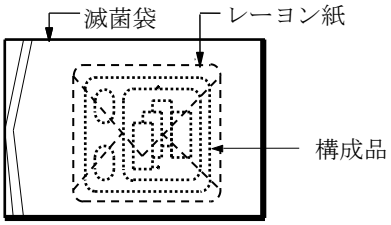

【使用上の注意】

・開封前に滅菌紙やトレーが破損、汚損又は水濡れしている場合には使用しないで下さい。
・本製品は、滅菌済のため、包装を開封したら直ちに使用して下さい。
・開封の際は、内容物が飛び出したり、滅菌紙が破れたりする場合がありますので、ご注意下さい。
＊・救急絆創膏及び固定テープの使用により、発疹、発赤、水疱、皮膚剥離、かゆみ等が生じた場合には、使用を中止して下さい。
・構成品の綿棒の軸には天然木を使用しておりますため木目の入り方や力を入れすぎた場合には折れることがありますので、ご使用の際は十分ご注意下さい。
・本製品の医療用手袋は、パウダーフリー手袋です。
・本製品の容器、内容物は焼却可能です。

【保管方法及び有効期間等】

1. **保管方法**：水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光の当る場所を避けて保管して下さい。
2. **使用期限**：外箱及び製品に表示。（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

［製造販売元］

ニチバンメディカル株式会社

〒838-0815　福岡県朝倉郡筑前町野町字禅門橋1713

(TEL) 0946-24-8021