2022 年 5 月作成（第 1 版）　　届出番号 11B1X10025800701


器 24　知覚検査又は運動機能検査用器具

一般医療機器　再使用可能な体表面電気刺激装置用電極　43441000（ＪＭＤＮコード）

【　CBN-PJ1020 導電ゲルパッド　】

【禁忌・禁止】
・本製品の分解・改造はしないでください。
・専用機器以外の機器以外には接続しないでください。

【形状、構造及び原理等】

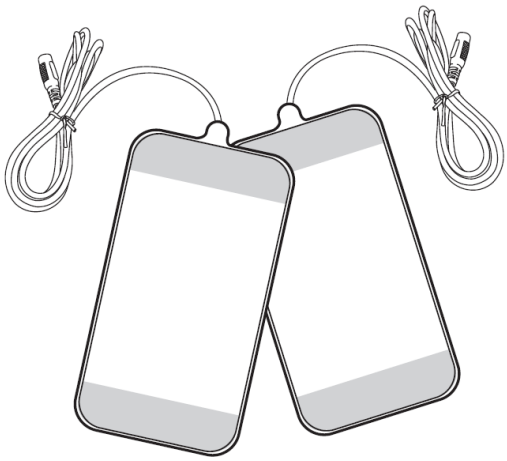

寸法：長 1555×横 101(㎜)

【使用目的又は効果】

本製品は、組織に電流を流すために電気刺激装置とともに使用する、体表面に用いる電極をいう。陰極と陽極の両方を備える。本品は再使用することができる。

【使用方法等】

1)本品の包装を開けて電極を取り出し、保護フィルムから電極を剥がします。
2)電極中央の点線が両手は手首の骨頭、両足はくるぶしと一直線になるように付着する。
3)使用後、電熱パッドのパッドプラグを本体から抜き、身体に取り付けた電熱パッドを取り外す。
4)電熱パッドに保護フィルムをもとのように貼り付け、保存袋に入れ、保存袋の口のチャックをしっかりと閉める。

【使用上の注意】

＜使用注意＞
・記載した目的にのみ使用すること。
＜重要な注意事項＞
・開封後は袋の口を締めるなどゲルの乾燥防止に努め、早めに使用する。
・使用方法を確認し、正しい位置に電極を付着する。
・電極にゲルを追加して使用しない。
・皮膚疾患や創傷のある部位に使用しない。
・付着部位に発赤・腫脹などの過敏症状が現れた場合、使用を中止する

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]
・水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて 保管すること。
[有効期間]
・製造より３年間[自己認証による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
名称：アドバンスジャパン株式会社
住所：埼玉県川口市大字東本郷１１８－１
電話番号：048-234-8291

外国製造業者：エイベックスエスジーテクノロジー社
AVEX-SG Technology Inc.（台湾）