医療機器届出番号 13B1X00069AC001A

機械器具(25) 医療用鏡
一般医療機器 自然開口向け単回使用内視鏡用感染防止シース JMDN コード：70172000

# McGRATH MAC ディスポーザブルブレード

**再使用禁止**


**【警告】**
1. *本品は当社指定のビデオ喉頭鏡専用である。施術前に必ず本品がビデオ喉頭鏡のカメラスティックに正しく装着されていることを確認すること［使用中の脱落及び/又は破損による傷害のおそれがあるため］。

***【禁忌・禁止】**
1. 本品は再使用禁止である。

**【形状・構造及び原理等】**

1. 概要
本品は、ビデオ喉頭鏡使用時に、ビデオ喉頭鏡のカメラスティックに装着し、粘膜や血液・体液等にカメラスティックが直接接触することを防止、保護するために使用するブレードである。

2. *形状、構造等

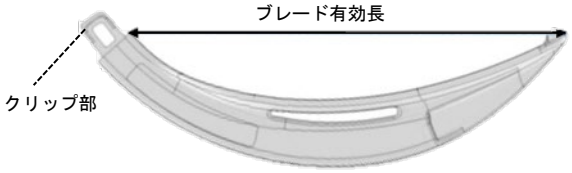


本品の各タイプにおける寸法は以下のとおり。

| タイプ | ブレード有効長(参考値) |
|---|---|
| MAC 1 | 93 mm |
| MAC 2 | 102 mm |
| MAC 3 | 114 mm |
| MAC 4 | 126 mm |

3. *原材料
ポリカーボネート、コーティング剤(曇り止め)
本品はラテックスフリーである。

***【使用目的又は効果】**
本品は、ビデオ喉頭鏡使用時に、ビデオ喉頭鏡のカメラスティックに装着し、粘膜や血液・体液等にカメラスティックが直接接触することを防止、保護するために使用する。単回使用である。

**【使用方法等】**

1. *組合せて使用する医療機器
本品は以下のビデオ喉頭鏡に組合せて使用する。ただし、構成品タイプ MAC1 は「McGRATH MAC AO3 ビデオ喉頭鏡」との組合せに限るものとする。

| 販売名 | 医療機器認証番号 |
|---|---|
| McGRATH MAC ビデオ喉頭鏡 | 224AABZX00112000 |
| McGRATH MAC AO3 ビデオ喉頭鏡 | 302ACBZX00012000 |

2. 使用方法
(1) 本品を包装から取り出し、ビデオ喉頭鏡のカメラスティックにかぶせるよう、形に沿って本品をはめ込む。本品のクリップ部がカメラスティックにしっかりはまったら、装着が完了する。
(2) 本品を取り外す際は、クリップ部を引き上げて、本品を引き出す。

**【使用上の注意】**

1. 重要な基本的注意
(1) 使用前に、本品の外表面に、患者に損傷を与える可能性のある粗い表面、鋭いエッジ又は突起がないことを確認すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

1. *保管条件
高温多湿を避けて保管すること。
2. *有効期間
有効期限は自社認証(当社データ)による。有効期限については外装表示参照。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：
コヴィディエンジャパン株式会社
カスタマーサポートセンター：0120-998-971



接続する機器の取扱説明書および添付文書を参照すること