**2023 年 5 月改訂(第 6 版)
*2022 年 8 月改訂(第 5 版)
医療機器届出番号 13B1X00069AC002A

機械器具(25) 医療用鏡
一般医療機器 自然開口向け単回使用内視鏡用感染防止シース JMDN コード：70172000

McGRATH X ディスポーザブルブレード


再使用禁止

【禁忌・禁止】
1. 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 概要
本品は、ビデオ喉頭鏡使用時に、ビデオ喉頭鏡のカメラスティックに装着し、粘膜や血液・体液等にカメラスティックが直接接触することを防止、保護するために使用するブレードである。

2. *形状・構造等

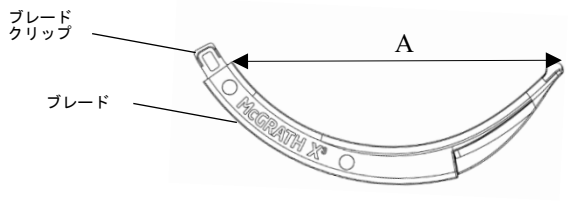

ブレード有効長 A(参考値)： 110mm

3. 原材料
ポリカーボネート
本品及び包装材料はラテックスフリーである。

【使用目的又は効果】
本品は、ビデオ喉頭鏡使用時に、ビデオ喉頭鏡のカメラスティックに装着し、粘膜や血液・体液等にカメラスティックが直接接触することを防止、保護するために使用する。単回使用である。

【使用方法等】

1. 組み合わせて使用する医療機器

販売名	医療機器認証番号
McGRATH MAC ビデオ喉頭鏡	224AABZX00112000
McGRATH MAC AO3 ビデオ喉頭鏡	302ACBZX00012000

2. 使用方法
ブレードを包装から取り出し、ビデオ喉頭鏡のカメラスティックにかぶせるよう、形に沿ってブレードをはめ込む。ブレードのクリップがカメラスティックにしっかりはまったら、装着が完了する。ブレードを取り外す際は、クリップを引き上げて、ブレードを引き出す。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
(1) 使用前に、本品の外表面に、患者に損傷を与える可能性のある粗い表面、鋭いエッジ又は突起がないことを確認すること。

2. その他の注意
(1) 本品は再使用禁止である。
(2) 本品は McGRATH MAC ビデオ喉頭鏡専用である。施術前に必ず本品がカメラスティックに正しく装着されていることを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 有効期間
有効期間は自己認証(当社データ)による。
有効期間については外装表示参照。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売元：
コヴィディエンジャパン株式会社
カスタマーサポートセンター：0120-998-971