**2021 年 12 月改訂（第 8 版）
*2021 年 4 月改訂（第 7 版）
承認番号：22000BZX01139000

歯科材料 06　歯科用印象材料
医薬品含有歯肉圧排糸 35861003
高度管理医療機器

ジンジパック

再使用禁止

【禁忌・禁止】*
- 次の患者には投与しないこと。
  1. アドレナリン、血管収縮剤に対し、過敏症の既往歴のある患者。
  2. 高血圧、動脈硬化、心疾患、甲状腺機能亢進、糖尿病等のある患者。（これらの症状が悪化する恐れがある。）
- 再使用禁止

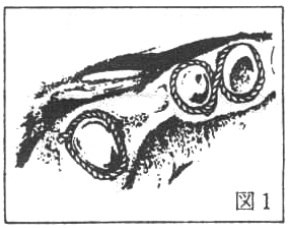
【形状・構造及び原理等】**
本品は塩酸アドレナリンを含有した綿糸で以下の種類があります。

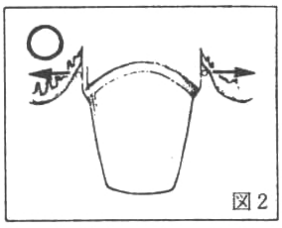
種類（コード）	塩酸アドレナリン含有量	直　径・形　状
ジンジパック 2-PLY	0.2mg/cm	極太(1.7mm)
ジンジパック #1	0.2mg/cm	細(0.6mm)
ジンジパック #2	0.2mg/cm	中細(1.4mm)
ジンジパック #3	0.2mg/cm	太(1.6mm)

直径の寸法は目安としてご利用下さい。

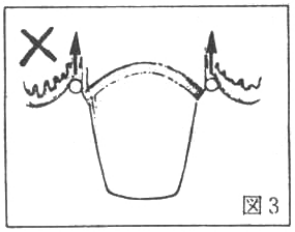
【使用目的又は効果】
［使用目的］
印象採得時に、一時的に歯肉を歯面から圧排し、印象採得の補助に用いる。

【使用方法等】
1. 太さの異なるコードを 2 本用意します。
2. 細いコードを歯頸部歯肉上に巻き付け、適当なインスツルメントで歯肉を傷つけないように歯肉溝の底部方向に押し込みます。このようにすれば、歯肉溝は効果的且つ安全に圧排されることになります。しかし、組織は押し広げられるだけで挫滅創にはなりません。（図 1、2）

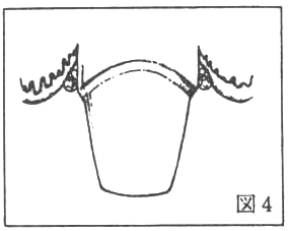

図 1

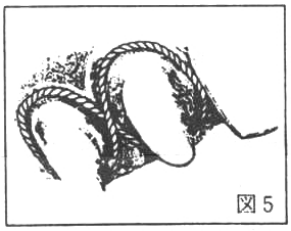

図 2

太いコードを最初から押し込むのは避けて下さい。（図 3）
付着上皮を損傷させる危険性があります。


図 3

3. 次に太いコードを最初のコードを巻き付けた上に重ねて巻きます。こうすることにより V 字型の圧排が出来ることになります。この状態で 3～5 分間放置しておくだけで希望する圧排が出来ます。（図 4）


図 4


図 5

4. コードを撤去して圧排箇所を清潔乾燥させます。
※最初のコードを残したまま補綴物の装着や印象採得を行う方が便利な場合もあります。

【使用上の注意】
［使用注意］
1. 血圧上昇・頻脈を起こすことがあるので、患者の全身状態を観察しながら、適用すること。
2. 慎重適用（次の患者には慎重に適用すること）
   1)高齢者又は全身状態が不良な患者[生理機能の低下によりアドレナリンに対する忍容性が低下していることがある。]（[高齢者への適用]の項参照）
   2)心刺激伝導障害のある患者[症状を悪化させることがある。]
   3)重症の肝機能障害又は腎機能障害のある患者[中毒症状が発現しやすくなる。]
3. 本品は一回限りの使用で廃棄し、再使用しないで下さい。
4. 個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
（注意事項の内容例）
平成 26 年 10 月 31 日　事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

［相互作用］
1. 併用禁忌（併用しないこと）
硫化鉄を含有した歯肉圧排液（アストリンジェント等）と併用しないで下さい。（ジンジパックに含まれるアドレナリンと硫化鉄が反応して歯肉を変色させます。）

2.併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ハロゲン含有吸入麻酔薬 ハロタン等	頻脈、不整脈、場合によっては心停止を起こすことがある。	これらの薬剤は、心筋のアドレナリン受容体の感受性を亢進させる。
三環系抗うつ薬 イミプラミン等 MAO 阻害薬	血圧上昇を起こすことがある。	これらの薬剤は、アドレナリン作動性神経終末でのカテコールアミンの再取り込みを阻害し、受容体でのカテコールアミン濃度を上昇させ、アドレナリン作動性神経刺激作用を増強させる。
非選択性β遮断薬 プロプラノロール等	血管収縮、血圧上昇、徐脈を起こすことがある。	これらの薬剤のβ受容体遮断作用により、アドレナリンのα受容体刺激作用が優位になり、血管抵抗性を上昇させる。
抗精神病薬（ブチロフェノン系、フェノチアジン系等） ハロペリドール クロルプロマジン等 α遮断薬	過度の血圧低下を起こすことがある。	これらの薬剤のα受容体遮断作用により、アドレナリンのβ受容体刺激作用が優位になり、血圧低下があらわれる。
分娩促進薬 オキシトシン等 麦角アルカロイド類 エルゴメトリン等	血圧上昇を起こすことがある。	併用により血管収縮作用が増強される。

［高齢者への適用］

高齢者では本品に含まれているアドレナリンの作用に対する感受性が高いことがあるので、患者の全身状態を観察しながら慎重に適用すること。

【保管方法及び使用期間等】

［保管方法］

遮光した気密容器に入れて保存して下さい。

［使用期限］

ラベル・包装に記載。（製造元データによる自己認証）

（例：EXP MM/YYYY は使用期限 YYYY 年 MM 月を示す。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：白水貿易株式会社
住所：〒532-0033
大阪市淀川区新高 1 丁目 1 番 15 号
電話番号：06-6396-4400
ＦＡＸ番号：06-6396-4457
ホームページ：https://www.hakusui-trading.co.jp
製造国：アメリカ合衆国
製造業者：Gingi-Pak