** 2022 年 6 月改訂　第 5 版
* 2016 年 6 月改訂

承認番号　16000BZZ00830000

機械器具　47　注射針及び穿刺針
管理医療機器　画像誘引生検キット　10403000

ソノプシー

（ 誘 導 筒 ）


再使用禁止


【禁忌・禁止】

・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

＜構造図（代表図）＞

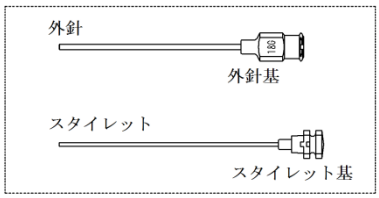

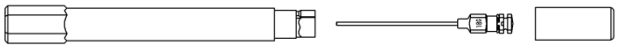

収納用コンテナ　　コンテナキャップ

**

型式	サイズ	対応 富士フイルムヘルスケア製超音波探触子
MP-2751-GP18S	18G×45mm	UST-5540P-7.5

・ 型式、サイズ等については、包装表示で確認すること。

【使用目的又は効果】

（承認申請書に記載なし）

【使用方法等】

・ 汚染に注意し、包装より取り出す。

・ コンテナキャップを外して、本品を取り出す。

・ 超音波探触子に装着し、生検針等の穿刺ガイドとして使用する。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

・ 包装から取り出す際には、汚染に十分注意すること。

・ 装着方法等については超音波探触子取扱説明書を参照すること。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

・ 予め、誘導する生検針等が本品に通ることを確認すること。

** ・ 本品は、富士フイルムヘルスケア製超音波探触子専用であり、併用する超音波探触子に対応した型式を使用すること。

・ 包装が既に破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。

・ 使用直前に開封して使用すること。

＜その他の注意＞

・ 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

・ 本品はエチレンオキサイドガス滅菌済み。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

・ 水ぬれ、直射日光、高温多湿を避け保管すること。

＜有効期間＞

・ 箱に記載している使用期限を参照のこと。（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

** 株式会社八光
TEL 026-275-0121

＜製造業者＞

** 株式会社八光

** 販売業者：富士フイルムヘルスケア株式会社
千葉県柏市新十条余二 2 番地 1
TEL 04-7131-4151