**2020年11月改訂（第3版）新記載要領に基づく改訂　　届出番号　13B2X00316310012
*2018年2月改訂（第2版）新記載要領に基づく改訂

類別：　機械器具55　医療用洗浄器
一般医療機器　一般的名称：　口腔洗浄器　　JMDN：12304019

口腔内エアースプレー　Fresh(フレッシュ)

【警告】
**1.口腔内以外の人体では絶対に使用しないこと。


【禁忌・禁止】
〈適用対象〉
1.本体にガスが残った状態で廃棄しないこと。
　廃棄するときは、火気のない屋外で 噴射音が
　消えるまでスパウトを押し、ガスを抜くこと。
2.不燃性を必要とする所のみに使用すること。
3.ノズルは他の患者に再使用しないこと。

【使用上の注意】

①気化熱で本体が冷たくなることがある為、連続で長時間噴射しないこと。
**②開封後、初めて使用するときは、試し噴射を行う。
　ただし、口腔内以外の人体では絶対に使用しないこと。
**③本体を斜めあるいは逆さにして噴射すると
　液体が出るため十分注意すること。
④ノズルは確実にスパウトに差し込むこと。
**⑤本缶を傾けて噴射したり、振りながら噴射すると、液体が出て
　低温火傷する恐れがあるため、十分注意して使用すること。

【形状・構造及び原理等】

*1. 外観

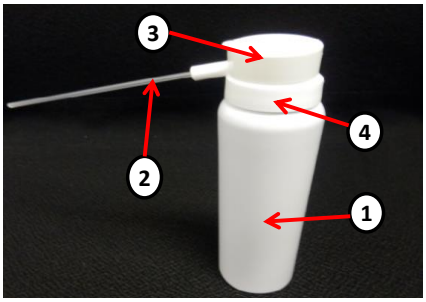

2. 構成
①本体（充填物：1,1,1,2-テトラフルオロエタンHFC-134aガス）
②ノズル(10本)
③キャップ
*④スパウト部

*3. 寸法及び重量
*①寸法　（本体：高さ118mm、径40mm　ノズル：100mm）
*②重量　120g

*4. 動作原理
本体充填物のガスをノズルから口腔内に噴射し、
異物、唾液等を除去する。

【使用目的又は効果】

歯科治療前に本体のガス噴射により、口腔内の異物除去及び
乾燥を行うために用いる。

【使用方法等】

①本体上部のキャップを取る。
②ノズルをスパウトに差し込む。
③口腔内にノズルを近づけ、スパウトを押し、ガスを噴射する。
**④使用中、本缶を傾けずに垂直にし噴射する。
⑤意図する噴射部位に届きにくい場合は、ノズルを曲げて使用する。
⑥1回の噴射を2秒程度とし、数回に分けて噴射する。
⑦使用後はキャップをスパウトにかぶせ、保管する。

【保管方法及び有効期間等】

*1. 保管の条件
①日光および高温多湿は避けて保管すること。（周囲温度－10℃～40℃）
②気圧、湿度、風通し、塩分、オゾン、硫黄分を含んだ空気等により
　悪影響の生じる可能性のある場所に保管しないこと。
③化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

*2. 有効期間
本品は消耗品のため、充填物を使い切った後で廃棄すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名　ピヤス株式会社

住所　　〒132-0035
　　東京都江戸川区平井6－73－9
電話番号　03-3619-1441
FAX　03-3619-1443

製造業者名　ピヤス株式会社

住所　　〒132-0035
　　東京都江戸川区平井6－73－9
電話番号　03-3619-1441
FAX　03-3619-1443