*2026年4月（第4版）
2017年4月（第3版）（新記載要領に基づく改訂）

製造販売承認番号 22000BZX01560000

機械器具 47 注射針及び穿刺針
管理医療機器　単回使用手動式ランセット　37466000

フェザー採血ブレイド

再使用禁止

【警告】
●非常に鋭利な先端であるため、取り扱いに注意すること。
［接触による穿刺等のおそれがある。］

【禁忌・禁止】
●再使用禁止。［感染症を引き起こすおそれがある。］
●本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】
形状



組成：ステンレス鋼


原理：本品は、鋭く尖った先端部分を持ち、皮膚表面に先端部分を突き刺し採血するための穿刺針である。

【使用目的又は効果】
血液採取又は嚢（のう）若しくは節（せつ）からの排膿を行う際、穿刺するために使用する。


【使用方法等】
包装を開封して取り出し、そのまま使用してください。

＜開封方法＞


1. アルミ箔（表・裏）をそれぞれ指で掴む。

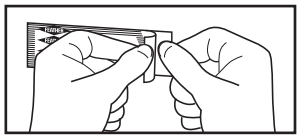


2. ゆっくりと引っ張り、最後まで開封する。

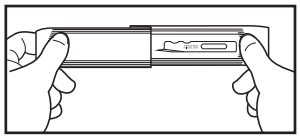

3. アルミ箔の裏側から、刃先に触れない様に替刃の刃元側を押し、剥がす。（替刃の刃元側を掴んでも可）

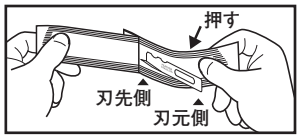

4. アルミ箔から清潔野へ静かに落とす。

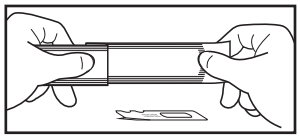

【使用上の注意】
＜重要な基本的注意＞
●耳朶等の、組織が薄い部位に使用する場合は、穿刺する力に十分注意し、貫通させないようにすること。［組織を貫通した先端で、誤って指を穿刺した場合、血液を介した感染のおそれがある。］

【保管方法及び有効期間等】
●高温・多湿、直射日光及び水濡れを避けて室温で保管すること。
●使用期限は製造日より5年。（自己認証による）
*例. ⌛ ○○○○-△△-□□は 使用期限○○○○年△△月□□日を示す。
●製造年月日はロットナンバーにより明示。

LOT 00 00 0000
製造年西暦下2桁　製造月　製造バッチ

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
＜製造販売元＞フェザー安全剃刀株式会社　美濃工場
岐阜県美濃市松森600-1　TEL.0575-33-1855
＜製造元＞フェザー安全剃刀株式会社　本社
大阪府大阪市北区大淀南3-3-70　TEL.06-6458-1631
＜お問い合わせ先＞フェザー安全剃刀株式会社　東京支店
メディカル商品部　TEL.03-3864-0917