

器 5 1 医療用嘴管及び体液誘導管  
一般医療機器 吸引チューブ 16779000

## シリコン吸引チューブ

TP-125

### \* 【禁忌・禁止】


- ・採血用には使用しないでください。
- ・変形するため過度に折り曲げたり、引っ張ったりしないでください。

#### [使用方法]

- ・口腔内等に挿入しないでください。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 形状・構造

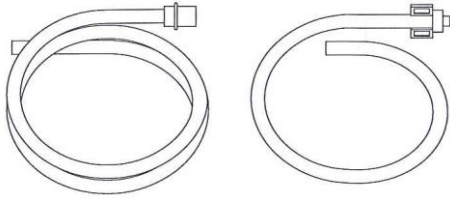

※型番によりサイズ及び仕様は異なります。

### \* 【使用目的又は効果】

吸引器具の接続に用いる柔軟性のあるプラスチック製のチューブである。

### \* 【使用方法等】

- 1) 吸引器に適合する吸引チューブを準備してください。
- 2) 吸引チューブを吸引器具に接続してください。

### 【使用上の注意】

- ・吸引物が詰まった場合は洗浄等を行い除去してください。
- ・折れ曲がりによる閉塞が生じないように使用してください。

### \* 【保管方法及び有効期間等】

#### 保管方法

水のかかる場所、高温多湿の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。

#### 耐用期間

1年（自己認証による）

### \* 【保守・点検に係る事項】

#### 使用者による保守点検事項

- ・使用前に本体が清潔であることを確認する。
- ・使用前に破損や汚れがないことを確認する。

#### 業者による保守点検事項

- ・破損や汚れがないことを確認する。

#### 洗浄・消毒

- 1) コネクタが接続されている場合は取り外してください。
- 2) 洗浄・消毒を行ってください。
- 3) 洗浄・消毒後は乾燥させてください。
- 4) 次の使用に備え、部品を正しく接続してください。

#### [推奨薬剤]

- ・消毒用アルコール
  - ・次亜塩素酸ナトリウム
- ※使用後は薬剤を洗い流してください。  
※薬剤により変色等の変化がある場合があります。

### \* \* \* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

ブルークロス株式会社  
TEL：049-243-9939  
www.bluecross-e.co.jp

販売業者（販売店）