


機械器具(06)呼吸補助器
高度管理医療機器 持続的自動気道陽圧ユニット 37234000
(再使用可能な人工呼吸器呼吸回路 37705000)

「ドリームステーション Auto」の付属品 ドリームステーション用スタンダードチューブ

【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び各部の名称

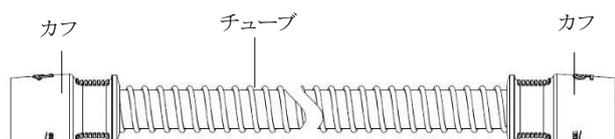

2. 寸法

全長: 1,830mm、カフ内径: 21mm、チューブ内径: 15mm

【使用目的又は効果】

本品は、CPAP 装置又はバイレベル装置から患者への空気又は酸素を含むガスの送込に用いる呼吸回路である。

【使用方法等】

1. カフをドリームステーションシリーズ本体または加温加湿器の送気口に接続する。
2. 逆側のカフをマスクに接続する。
3. ドリームステーションシリーズ本体を操作し、マスクを介し患者へ空気又は酸素を含むガスを送込する。

・適用機種

本品が接続可能なドリームステーションシリーズの機種は以下のとおり。

* 販売名	承認番号又は認証番号
ドリームステーション Auto	22800BZX00007000
ドリームステーション Pro	22800BZX00314000
ドリームステーション BiPAP Auto	22800BZX00348000

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- ・呼吸回路を引っ張ったり、変形させたり、負荷を加えない。

[呼吸回路の破損やリークを起こす原因となる。]

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・本品は一人の患者のみに使用する。[本品は滅菌できない。]

【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

- ・初めて使用する前及び毎日洗浄を行う。本体から外した後、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗浄し、十分にすすいでから、自然乾燥させる。

取扱説明書を必ずご参照ください

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

** 製造販売業者: 株式会社フィリップス・ジャパン

<緊急連絡先>

1. 平日 9:00~17:30

地域営業所・出張所・駐在

** ※地域営業所・出張所・駐在の連絡先は検索サイトより

「フィリップス スリープ&レスピラトリーケア 営業所」でご検索下さい。

2. 平日 17:30 以降~翌 9:00、土・日曜日と祝祭日

機器安全センター 0120-633881

製造業者: Respironics, Inc.

レスピロニクス インク

アメリカ合衆国