2017 年 6 月作成(第 2 版)(新記載要領に基づく改訂)
2015 年 3 月 2 日作成 (第 1 版)

医療機器届出番号:13B1X00008000031

機械器具 25　医療用鏡


一般医療機器　　自然開口向け内視鏡用くもり止め　JMDN ｺｰﾄﾞ：70176000

デフォッガー 内視鏡用くもり止め

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
本品は内視鏡の結露防止の無色透明な溶液及びスポンジ(5cmx4.5cm)で構成されている。

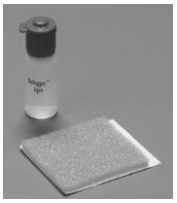

成分：水/イソプロピルアルコール/界面活性剤（ナトリウムジオクチル）

【使用目的又は効果】
自然開口部より挿入される内視鏡のレンズ面上に塗布して使用する。
内視鏡と体内温度差により発生する結露を防止する。
結露による視界不良を低減する。

【使用方法等】
1.スポンジのシールを剥がし、ドレープ上に貼付する。
2.キャップを開け、溶液を 5～6 滴スポンジに滴下する。
3.内視鏡のレンズ面にスポンジをこすりつけ本品を塗布する。
4.必要に応じて繰り返す。

【使用上の注意】
〈使用注意〉
・使用に関しては無菌的に取り扱い、すべての操作は汚染防止に配慮した上で行うこと。
・包装から取り出す際、容器の横転に注意すること。
・スポンジは水平な面に固定すること。
・スポンジ上にレンズ面を当てる際は必要以上に強く押し付けないこと。
・包装を開封したらすぐ使用し、開封した場合は未使用であっても廃棄すること。

〈重要な基本的注意〉
・本品がこぼれて目や皮膚に触れた場合は、直ちに清潔な水で洗浄すること。万一異常を感じたら速やかに医師の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間等】
〈保管方法〉
・水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて室温で保管すること。
〈有効期間〉
・製品の外箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証（自社データ）による]

【主要文献及び文献請求先】
株式会社フジメディカル
TEL：03-3356-8377

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者:
株式会社　フジメディカル
〒160-0004　東京都新宿区四谷 4-1　細井ビル 5F
TEL:03-3356-8377

外国製造業者:
デロイヤル　インターコンチネンタル社
DeRoyal Intercontinental, S.R.L.
ドミニカ共和国

FUJI MEDICAL CORPORATION
株式会社フジメディカル