2021 年 3 月作成(第 1 版)　　医療機器届出番号:13B1X00008000043


機械器具 55　医療用洗浄器
一般医療機器　創部洗浄キット　JMDN ｺｰﾄﾞ: 14462000

スーパーアトマイザー

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
本製品は、創傷部に生理食塩水等を噴霧するため、角度を変えられるようにダブルルーメンチューブにワイヤーを有し、シリンジに接続後、プランジャを押すことにより噴霧できる。(本製品にシリンジは含まれない。)

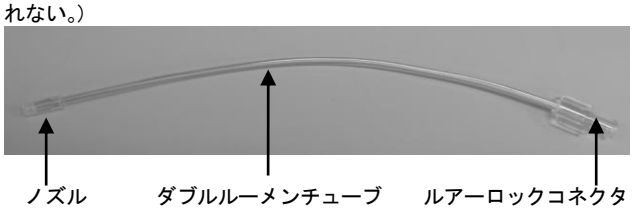

材質:ポリ塩化ビニル(可塑剤:DOP(フタル酸ジオクチル))/ポリカーボネート/ステンレス
滅菌:EOG 滅菌

【使用目的又は効果】
本品は、創傷部を洗浄するために用いる。

【使用方法等】
1. 本品に異常がないことを確認する。
2. 本品を汚染に十分注意しながら包装内より取り出す。
3. 本品をシリンジに取り付ける。ルアーロックコネクタとシリンジを確実に接続すること。
4. シリンジに生理食塩水等を充填する。
5. プランジャを押し、試験噴霧を行い、正常に噴射出来るかを確認すること。なお、シリンジ内に残っている空気は抜くこと。
6. ノズル部を噴霧する目的部位に向け、プランジャを押して噴霧する。
7. 終了後、感染・汚染に注意しながら、本品を安全に廃棄する。

【使用上の注意】
〈重要な基本的注意〉
・本品と共に他の製品を使用する場合は、製品の添付文書又は取扱説明書を必ず読み、その指示に従って使用すること。
・包装を開封したらすぐに使用すること。
・シリンジに接続する際にはルアーロックコネクタ部と確実に接続すること。
・接続部からの液漏れ等の異常が認められた場合は使用を直ちに中止すること。
・試験噴霧を行い、正常に噴射できるかを確認すること。

〈不具合・有害事象〉
1) 不具合
　漏れ、破損
2) 有害事象
　感染

【保管方法及び有効期間等】
〈保管方法〉
・水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて室温で保管すること。

〈使用期間〉
・製品の外箱の使用期限欄を参照すること

【主要文献及び文献請求先】
株式会社　フジメディカル
TEL:03-3356-8377

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者:
株式会社 フジメディカル
〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F
TEL:03-3356-8377

外国製造業者:
パシフィックホスピタルサプライ社
Pacific Hospital Supply Co., LTD.
台湾

FUJI MEDICAL CORPORATION