*2019 年 10 月改訂(第 2 版)
2016 年 2 月作成(第 1 版)

認証番号 227AABZX00092000

プログラム 1　疾病診断用プログラム
管理医療機器
体成分分析装置用プログラム　JMDN コード 36022032

FMT　体液管理ツール

【警告】

1)　本プログラムのみで診断を行わないこと。


【形状・構造及び原理等】

1.　概要

FMT　体液管理ツール(以下 FMT)は、体成分分析装置(販売名:BCM　体組成分析装置、認証番号:225AABZX00076000、以下 BCM)から得られた測定値をデータ管理するプログラムである。本プログラムは記録媒体で提供され、汎用パーソナルコンピュータ(以下汎用 PC)にインストールして使用する。測定値は専用の外付け PC カードリーダーを介して BCM　患者カードより読み込む。また、参考値として健常者のデータを表示することができる。

2.　動作原理

BCM の測定値を記録してメモリ(BCM 患者カード)から測定データを取り込み、保存・管理することができる。さらに、データをグラフ化して、診断の際視覚的に見やすくする。

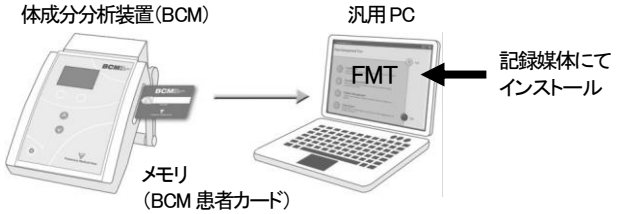

3.　機能

1	体組成の測定結果の表示・記録
2	グラフ化

4.　併用機器

販売名	一般的名称	認証番号
BCM　体組成分析装置	体成分分析装置	225AABZX00076000
BCM　患者カード★	—	—
外付け PC カードリーダー★	—	—

★…BCM 体組成分析装置の構成部品に含まれる。

5.　流通形態

本品は単品で流通される他、BCM に同梱されて流通される場合がある。何れの場合も、記録媒体で提供される。

【使用目的又は効果】

体成分分析装置で測定された体の水分量、脂肪量及び除脂肪量の体組成の情報を記録・管理するプログラムである。

*【使用方法等】

詳細な手順は、本品の取扱説明書に従うこと。

*1.　プラットフォームの要件

オペレーティングシステム	Microsoft Windows XP、Vista、7、8、10
メモリ	512MB　RAM 以上
ハードディスク空容量	100MB 以上
画面解像度	1280　×　768 ピクセル以上

*2.　起動

(1)　FMT を PC にインストールする。
(2)　PC には外付け PC カードリーダーを取り付けておく。
(3)　アイコンを選択し、本プログラムを起動する。
(4)　初期画面が開かれ、適当なタブとボタンを選択することにより、次項のような機能を行うことができる。

*3.　各機能の使用方法

(1)FMT データベースタブ

1)　測定データ・グラフの表示
表示させたい患者データを選択し、その患者の詳細画面を開き、データやグラフを表示させる。
2)　測定時入力データの追記・変更
編集したい測定データを選択し、その患者の詳細画面を開き、データを追記・変更する。
3)　患者データの編集
編集したい患者データを選択し、その患者の詳細画面を開き、患者データを編集する。
4)　データのエクスポートには以下の 3 種類がある。
①データをファイルに保存:データはカンマ区切り(CSV)ファイルとして保存する。
②Copy to clipboard:データはカンマ区切り(CSV)フォーマットでクリップボードにコピーする。その後任意のテキスト編集プログラムに貼り付けることが可能。
③データベースバックアップの作成:FMT 上にある全てのデータのバックアップを作成する。

(2)BCM　患者カードの管理タブ

1)　BCM で測定したデータのインポート
PC カードリーダーに、インポートするデータの患者カードを挿入する。
必要な測定結果のデータをインポートする。
2)　新規の患者カードの作成
PC カードリーダーに、データの入っていない新規の患者カードを挿入する。
適当なボタンを選択し、患者データ(氏名・性別等)を入力して、新規患者を登録する。
なお、FMT データベースタブ画面でも新規患者の登録は可能。

*4.　終了

画面右上の×を押して FMT を終了させる。

*　本品の取扱説明書を必ずご参照下さい。

FRESENIUS MEDICAL CARE

*【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1）本品の取扱説明書の内容をよく理解した上でご使用下さい。本品は適正な使用と取扱いに関するトレーニングを受けた方のみ操作可能です。本品のデータの本品以外での使用に関しては、一切責任を負いません。
2）パラメーター入力時はユーザーが検証して下さい。例えば、入力した値が正しいかを検証するなどの確認をして下さい。
3）本品で追記したデータはBCMでは表示できません。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:
フレゼニウス メディカル ケア ジャパン株式会社
http://www.fresenius.co.jp/

製造業者:
フレゼニウス メディカル ケア ドイツ GmbH, ドイツ
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

販売業者:
日機装株式会社
電話番号:03-3443-3751