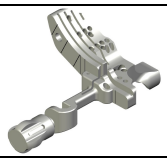
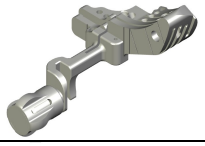
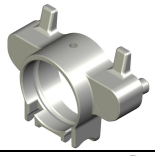
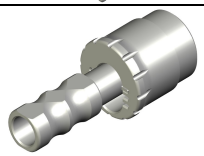
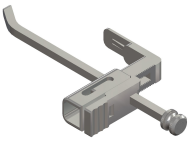
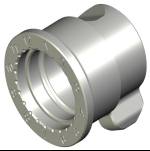
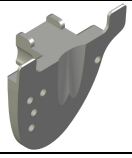
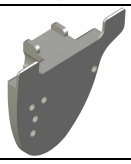
医療機器届出番号 29B2X10008260139

一般医療機器　類別:器 58 整形用機械器具
一般的名称:関節手術用器械　(JMDN ｺｰﾄﾞ:70964001)

PCCK用手術器械

【禁忌・禁止】
1.本器械について、改造や加工等を行わないこと。[形状の変更や刻印をするなどの二次加工は折損の原因となるため]
2.Persona Revision PCCK 器械以外の器械と併用しないこと。
3.Persona Revision PCCK インプラント設置を目的とする手技以外に使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】
1.形状等
本器械は、人工膝関節置換術に使用する器械である。

	PCCK JSI ティビアルカット G-L
	PCCK JSI ティビアルカット G-R
	PCCK JSI ティビアルベース
	PCCK JSI オフセットブッシング
	PCCK JSI ティビアルスタイラス
	PCCK JSI ティビアル DG
	PCCK JSI フェモラルベース
	PCCK JSI アンテリア G S-L
	PCCK JSI アンテリア G S-R
	PCCK JSI アンテリア G M-L
	PCCK JSI アンテリア G M-R

材質:ステンレススチール、サマリウムコバルト磁石
(ステンレススチールには、クロム及びニッケルが含まれている。)

2.原理
本器械は、脛骨又は大腿骨の骨切りに使用する。

【使用目的又は効果】
本器械は再使用可能な手術器械であり、人工膝関節置換術に用いる。

【使用方法等】
1.使用方法
(1) 本器械は未滅菌のため使用前に滅菌すること。滅菌は【保守・点検に係る事項】の〈滅菌方法〉により行うこと。
(2) 本器械は人工膝関節置換術の際、脛骨又は大腿骨の骨切りに使用し、インプラントを適切に設置するために用いる。
(3) 使用後は【保守・点検に係る事項】の〈使用者による保守点検〉により洗浄すること。

2.使用方法等に関連する使用上の注意
(1) 使用する IM リーマーのサイズや設置位置によっては、IM リーマーと固定ピンが干渉する可能性があるため、症例に応じて使用可能なスクリューホールを選択すること。
(2) PCCK JSI ティビアルベース及び PCCK JSI アンテリア G シリーズの構成部品に磁石が含まれるため、電気デバイスに近づけないこと。
(3) 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力を加えないこと
(4) 滅菌前に本器械に損傷、変形等の異常がないことを点検すること。
(5) 使用前に必ず洗浄、滅菌すること。
(6) 使用後は直ちに点検し、破損、折損等が見つかった場合は破損片が体内に遺残していないか調べ、遺残していた場合は摘出等適切な処置を施すこと。
(7) 摩耗粉が生じた場合は、速やかに洗浄し除去すること。
(8) 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないように、直ちに洗浄液に浸漬すること。

【使用上の注意】
1.重要な基本的注意
(1) 併用するインプラントや器械の添付文書を必ず読んでから使用すること。
(2) 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚染物を除去し、感染防止のため洗浄・消毒すること。
(3) 損傷・変形等がある器械は、識別した上で再使用しないこと。
(4) 滅菌は、正しく整備、校正された滅菌器を使用すること。
(5) 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は腐食の原因になるので、できるだけ使用を避けること。使用中に付着した時には水洗いすること。強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は器械を腐食させるおそれがあるので、使用を避けること。金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は、器械の表面が損傷するので、汚染物除去及び洗浄時に使用しないこと。

(6) 本器械がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。また、本器械がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。

2.不具合・有害事象

(1) 重大な不具合
  1) 破損
  2) 変形
  3) 摩耗

(2) 重大な有害事象
  1) 血管、神経、組織、骨又は関節の損傷
  出血、骨折又は神経障害等
  2) 感染
  3) 過敏症(アレルギー反応)
  4) 破損片の体内遺残
  5) 本器械の不具合によって起こる手術時間の延長、手技の変更及び再手術

3.高齢者への適用

高齢者は、骨が粗鬆症化している場合があり、術中に過度の力を加えることにより骨折やインプラント埋植後に緩み等が起きる可能性があるので慎重に使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

水濡れおよび高温多湿を避け、室温にて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

〈使用者による保守点検〉

(1) 使用後は、可能な限り分解して洗浄すること。また、損傷がないかどうかを検査すること。
(2) 洗浄に用いる洗剤は適切な酵素洗浄剤を使用すること。
(3) 汚れた器械は 5 分間以上洗浄液に浸漬すること。洗浄は、柔らかいブラシを使用しスレッド部、隙間や継ぎ目などの洗浄しにくい箇所に注意を払い血液や異物等を落とすこと。
(4) 壊れやすい部分に気を付けて、曲げたり、器械の機能を損なわないようにブラシ等で洗浄すること。
(5) 超音波洗浄により中性洗剤を用い 10 分間以上洗浄すること。
(6) 器械は温かい精製水(ろ過、蒸留水、脱イオン化等)で完全に洗い流すこと。
(7) 最終洗浄後は、直ちに乾燥させること。

〈滅菌方法〉

本器械は医療機関内において 10^{-6} 以下の無菌性保証水準が得られる条件で滅菌を行う。

・高圧蒸気滅菌の場合

サイクル:前真空

温 度	時 間
121℃	20 分

(滅菌方法については、滅菌装置製造元の使用説明書に従うこと。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者] 株式会社フジフレックス

電話:0743-72-0888