
機械器具（01）手術台及び治療台
一般的名称：物理療法台 JMDN コード 13964000

マニュメッドチルトテーブル 2 セクション 725

【禁止・禁忌】
-適用対象(患者)
・体重150 kg以上の患者には使用しないこと。
-併用医療機器
・短波治療器に近接（2m以下)して使用しないこと。［誤作動や故障の恐れ］
-使用方法
・テーブルトップに患者を固定用ストラップで固定する前に、傾斜を開始しないでください。
・テーブルを上昇、下降、傾斜するときに、患者や操作者自身の体の一部や衣服が、装置の可動部分の間に挟まらないようにしてください。

【形状、構造及び原理等】

1．形状・構造

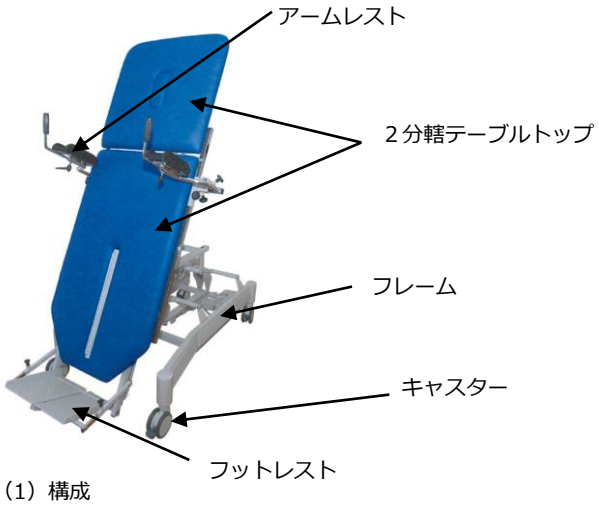

（1）構成
・本体　（テーブルトップ 寸法：長さ 202 x 幅 67 cm）
・ハンドスイッチ
・電源ユニット

・オプション品
3445043　アームレスト（2個1組)
3445044　ワークテーブル
3445065　アームレスト/ワークテーブル固定バー
3445023　ベルクロファスナー付き固定ストラップ, 120 x 5 cm
3445014　ベルクロファスナー付き固定ストラップ, 160 x 8 cm
3445015　ベルクロファスナー付き固定ストラップ, 240 x 8 cm
3445475　安全ロック付き固定ストラップ, 250 x 5 cm
3445474　安全ロック付き固定ストラップ, 350 x 5 cm
3445024　膝/胸部固定ストラップ
3445046　膝用固定ストラップ

（2）電気的定格
定格電圧：120/230 VAC
周波数　：　50/60 Hz
平均電流消費量 ：最大 4.0 A

（3）機器の分類
電撃に対する保護の形式：クラス II 機器
電撃に対する保護の程度：B型装着部
水の有害な侵入に対する保護の程度による分類：IP44

（4）原理
本品は、患者を水平から垂直に、0 °から 90°の間で無段階に移動させるために特別に設計された傾斜テーブルです。特に、患者の立位への順応改善、下肢筋力の増強や神経筋の運動治療に理想的な装置です。

（5）　性能
高さ調整　：　55 ～ 106 cm
傾斜調整　：　0 ～ 90°
背もたれ傾斜：　0 ～ 82°
リフト可能重量：　150 kg

（6）　使用環境
温度　　：+10 ～ +50 ℃
湿度　　：　30 ～ 70 %
気圧　　：　700 ～ 1060 hPA
天井高さ（最小）：　2m 30cm

直射日光、紫外線、過剰なほこり、湿気、機械的振動、衝撃を避けて設置してください。

【使用目的又は効果】
機能訓練トレーニングテーブルとして、水平位置から垂直位置まで連続的な傾斜角度が設定できるように設計されています。高さを可変する機能により、車椅子またはベッドからの患者の移動が容易となり、寝たきりの患者に対して立位への順応改善、下肢筋力の増強、ストレッチ等に利用することができます。

【使用方法等】
機器の設置、操作方法の詳細については、付属の取扱説明書に従ってください。

（1）[準備]
1. 本品の設置場所が、治療室内のどの方向からも容易にアクセスできる位置であることを確認します。
2. 十分な天井スペースを持つ設置場所であることを確認します。
［ 天井高さ(最小) 2m 30cm ］
3. 本品の設置場所への移動後、あるいは患者をテーブルの上に乗せる前に、必ずキャスターをロックします。
4. 傾斜操作を開始する前に、必ず患者を適切にテーブルに固定します。固定には必ず、専用固定ストラップ（膝、胸部用）を使用し、テーブルトップ両側のサイドレールにストラップを固定してください。

（2）[操作方法]
1. 電源ケーブルを電源に接続します。
※　長期間使用しない場合は、電源ケーブルを電源から抜いてください。
2. 高さ調整
ハンドスイッチ上部のボタンを押し、高さを調整します。
3. 傾斜（チルト）調整
ハンドスイッチ下部のボタンを押し、傾きを調整します。
※　傾斜操作を開始する前に、必ずテーブルの高さが最低位置となっていることを確認してください。
※ 傾斜操作を開始する前に、必ず 2 つのフットレストが正しく上向きの位置になっていることを確認してください。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

※ テーブルが水平位置になっている場合にのみ、フットレストの角度を調整することができます。

4. フットレスト

スプリング式ノブを引き、フットレストの角度を調整します。調整が終わったらノブを解放します。フットレストは必要に応じて完全に折り畳むことができます。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

電動で動作させる場合は、機器のモーターが過熱状態になる恐れがあるため、4 分間以上連続して使用しないでください。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

(1) 患者をテーブルトップに適切に固定する前に傾斜操作を開始しないでください。膝と胸部の専用固定ストラップを必ず使用してください。

(2) テーブルを上昇、下降、傾斜するときに、患者や操作者自身の体の一部や衣服が、装置の可動部分の間に挟まらないようにしてください。

(3) フットレストが正しい上向きの位置となる前に、絶対に傾斜操作を開始しないでください。

(4) 本品を消毒する場合は、消毒剤の使用説明書の指示に従ってください。その際、金属フレームのヒンジ部に水が溜まらないように注意してください (さびが発生する可能性があります)。

(5) 電源ケーブルが、本品の可動部分に巻き込まれないように注意し、つまずく危険のないように取り付けてください。

(6) 本品は集中治療環境で使用には適していません。

(7) 水治療室(いわゆる「ウェットルーム」)で使用しないでください。

(8) 本製品専用の Enraf-Nonius 社製純正アクセサリを必ず使用してください。

<相互作用>

短波治療器に近接した場所（2m 以下)で使用しないでください。誤作動や故障の原因となります。

【保管方法及び有効期間】

(1) 貯蔵・保管方法

温度：-10 ～ +50℃

湿度： 30 ～ 70 %

気圧：800 ～ 1060 hPA

直射日光、紫外線、過剰なほこり、湿気を避けて保管常温、結露の生じない場所に保管してください。

(2) 耐用期間

本体：10 年

（自己認証、定期保守点検やメンテナンスがされている場合）

【保守点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

(1) 本品は使用前と消毒前に清掃してください。
テーブルと付属品は、湿らせた布と家庭用洗剤を使用して洗浄してください。湿らせた布でふき取り、最後に乾いた布で仕上げてください。アルコールを含む薬剤や、合成皮革を傷つける恐れのある強力なクリーナーは使用できません。

(2) 動作安全性確認として、1ヶ月に 1 回必ず、テーブルを完全に水平にしてから最高位置に上昇させる ”リセット操作” を実施してください。

(3) ハンドスイッチを使用して、各セクションの動作確認を少なくとも 1 ヶ月に 1 回 定期的に実施してください。ハンドスイッチの動作部は、グリース等が付着しないように清潔な状態を保ってください。

(4) 長期間使用していない場合は、少なくとも 6 ヶ月に 1 回の頻度で、高さ調節の機能を確認してください。

<業者による保守点検事項>

(1) 本製品は、1 年に 1 回の頻度でメンテナンスをおこなう必要があります。定期メンテナンスの依頼は下記の製造販売業者にご連絡ください。

(2) 不具合が生じた場合は、状態を把握したうえで、下記の製造販売業者にご連絡ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：フィンガルリンク株式会社
住所　　：東京都台東区元浅草２－６－６　東京日産台東ビル
電話番号　　：０３―６８０２－７１４５
外国製造業者：Enraf-Nonius B.V.（オランダ）

取扱説明書を必ずご参照下さい。