*2022 年 6 月 改訂 （第 1 改訂版）
2020 年 11 月 （制定版）

医療機器認証番号：302AKBZX00085000

機械器具 58 整形用機械器具
管理医療機器 歯列矯正用ロック JMDN ｺｰﾄﾞ 38741000

リンガルロック


再使用禁止

【禁忌・禁止】
本品は以下の患者には使用しないこと：
・ニッケル又は本品に敏感な患者
本品は使い捨てであり、再使用をしてはならない。

【形状・構造及び原理等】
本品は歯列矯正用の舌側弧線維持装置であり、下記により構成される。

種類：用途に応じて次の種類がある。

＊（形状）

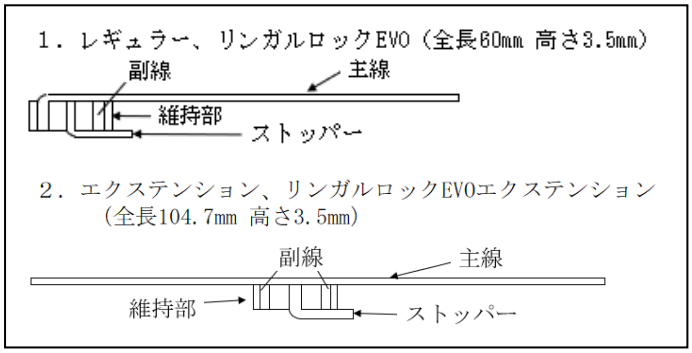

（原材料）

1．レギュラー、エクステンション

部品名		材質
脚部	主線	ステンレス鋼
	副線	
	ストッパー	コバルトクロム合金
維持部		ステンレス鋼

＊2．リンガルロック EVO、リンガルロック EVO エクステンション


部品名		材質
脚部	主線	ステンレス鋼
	副線	
	ストッパー	コバルトクロム合金
維持部		ステンレス鋼

（原理）
本品は、歯列矯正の際、歯列矯正用ワイヤを歯列矯正用アタッチメントにろう付けして使用する。

【使用目的又は効果】
歯列矯正用ワイヤをブラケット等に固定するために用いる。

【使用方法等】
矯正治療の際、原則的には左右の第一大臼歯の帯環にろう付して使用する。

技工作業の際は、本品のろう付部を鉗子などでつかまないようご注意ください。
主線を曲げる際は、ろう付部を避けて作業してください。
（下図参照）

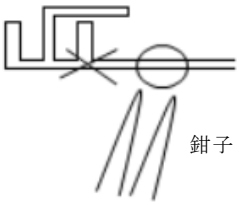

［使用方法等に関連する使用上の注意］
1．ろう付作業中は換気に十分注意するとともに、保護メガネを使用して目を保護すること。また、作業終了後は速やかに洗面、洗眼、うがいなどを行いフラックスによる汚染を除くこと。
2．ソルダーは、低融のろう線を使用すること。
3．フラックスは、歯科用フラックスを使用すること。
4．歯科用フラックスを使用する場合には、その説明書に表示してある使用上の注意事項を守ること。

【使用上の注意】
1．使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
2．過度な操作により、主線のストッパー及び副線のろう付部が破損、脱落することがあるので、取り扱いは慎重に行うこと。
3．口腔内で本品の削合や研磨を行わないこと。
4．本品の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
5． 本品は１患者１治療とし、再使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】
［保管方法］
本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：
フォレスタデント・ジャパン株式会社
東京都港区赤坂二丁目１０番１２号
生駒硝子ビル２階
電話：03-6277-6980

製造業者：
株式会社アソインターナショナル
東京都中央区銀座二丁目 11 番 8 号 第 22 中央ビル