2023年2月（第1版）　　認証番号　305ADBZX00008000

機械器具３７ 医療用匙
管理医療機器　　単回使用眼科用鋭ひ（32772002）
（単回使用眼科手術用チューブ付カニューレ（34899022））

トラベクター

再使用禁止

【禁忌・禁止】


<使用上の禁止>

・ 再使用禁止

<併用医薬品における禁止>

・ 本品は医薬品との併用を意図していないが、万が一使用する場合は、有機溶剤、脂肪乳剤、油性成分を含有する医薬品を併用しないこと。［本品が破損する恐れがある。］

【形状、構造及び原理等】

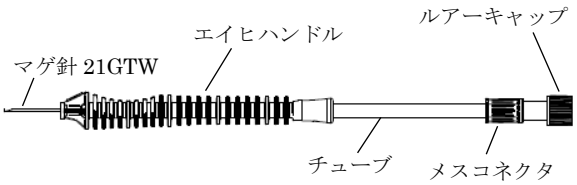

〈材質〉

マゲ針 21GTW：ステンレス鋼

エイヒハンドル、メスコネクタ：ポリカ―ボネート

チューブ：ポリ塩化ビニル（PVC）

PVC は可塑剤 DEHP（フタル酸ジ-2 エチルヘキシル）を含有する。

〈作動原理〉

先端部は線維柱帯等の眼内組織に容易に挿入が可能であり、線維柱帯の切除を行う。

本品は切除のみの使用も可能であるが、外部の灌流／吸引装置に接続することによって、切除を行いながら灌流又は吸引を行うこともできる。灌流の場合は灌流液を眼内に導く、吸引の場合は吸引孔により眼内からの排液を吸引することが可能である。

【使用目的又は効果】

本品は、眼科手術時に灌流液の注入、眼内物質の吸引、及び眼組織の切除を使用目的とする単回使用眼科手術用器具である。

【使用方法等】

1. 本品の包装を無菌的に開封する。
2. （灌流又は吸引を使用する場合）ルアーキャップを外し、メスコネクタを眼科手術機器の灌流ライン又は吸引ラインに接続する。
3. 本品は術式及び術部に応じて眼科用鋭ひとして用いる。本品先端の匙部を操作して線維柱帯等の眼組織の切除を行う。（灌流又は吸引を使用する場合）灌流又は吸引を行う。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1. チューブの原材料ポリ塩化ビニル（PVC）は、可塑剤 DEHP（フタル酸ジ-2-エチルヘキシル）を含有するため、可塑剤が溶出する恐れがある。

＜不具合・有害事象＞

・眼内炎
・術後感染

＜その他の注意＞

・本製品を使用する前に必ず異常がないかを確認すること
・異常を発見した場合には使用しないこと
・先端部の取り扱いには十分に注意すること
・単回使用のため再利用はせず、使用後は適切に廃棄すること

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

高温・多湿、直射日光及び水濡れを避けて室温で保管すること

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：有限会社プライムファイン
電　　話：03-5579-2161