**2026 年 5 月 改訂（第 11 版）
*2023 年 12 月 改訂（第 10 版）

認証番号：220AGBZX00045000

類別：機械器具 25 医療用鏡
一般的名称：軟性胃十二指腸鏡　35087000
管理医療機器・特定保守管理医療機器

ペンタックス　上部消化管ファイバースコープ　ＦＧ－２９Ｖ


【警告】
≪使用方法≫
1　本添付文書、及び取扱説明書では、使用前点検や使用後の手入れについて触れている。具体的な検査手技については、医学的に専門の立場から判断すること[感染や組織損傷の恐れがあるため]。
2　本製品は、内視鏡検査に熟知した医師が、使用目的に合致していることを確認の上、医療施設内で、使用すること[汚染や感染の恐れがあるため]。
3　本製品は未消毒、未滅菌状態で出荷されている。購入後や修理後は、使用前に、取扱説明書に従って、適切な再処理を施すこと[感染の恐れがあるため]。
4　使用後は、取扱説明書に従って、適切な再処理を施すこと[感染の恐れがあるため]。
5　使用中及び使用後の手入れの際は、耐薬品性のあるゴム手袋、マスク、ゴーグル、防水ガウンの着用など、適切な防御処置を講じること[感染や薬液の飛散の恐れがあるため]。
6　保管状況が不適切な場合や、長期間保管した場合、より安全を期すため、使用前に再処理を行うこと[内視鏡が細菌等に汚染されていることがあるため]。
7　本製品及び組み合わせて使用する各機器の機能と適合性を、各取扱説明書に基づき、使用前に確認すること。異常が疑われる機器は使用しないこと[不測の事故をもたらす恐れがあるため]。

≪適用対象（患者）≫
1　免疫力の低下が疑われる患者へは、病院の判断により、必要に応じて、直前に再処理した内視鏡を使用すること[感染の恐れがあるため]。
2　患者の全身状態を観察し、応急処置を準備すること[出血やアレルギー等による重篤な健康被害を防ぐため]。
3　全身状態が不調の患者に対しては、心電図による監視、酸素補給、補液を行いつつ、検査を施行するか、あるいは、検査を中止すること[出血やアレルギー等による重篤な健康被害を防ぐため]。

≪併用医療機器≫
1　ペースメーカ等を装着した患者に使用する際は、事前に専門医と協議し、十分な準備を行い、安全性を確認した上、使用するか判断すること[電磁波により障害を及ぼす可能性があるため]。

【禁忌・禁止】
≪使用方法≫
1　無理な操作（挿入、湾曲、送気送水、抜去等）はしないこと[粘膜の損傷、出血、穿孔の原因になるため]。
2　高濃度酸素の環境下等、可燃雰囲気下での、本製品と高周波装置やレーザー装置を組み合わせた使用はしないこと[爆発の危険性があるため]。
3　本製品及び能動処置具等は、心臓及び心臓近傍には使用しないこと[心臓機能へ影響を及ぼす可能性があるため]。
4　内視鏡先端部からの照射光を直視しないこと[眼に障害を引き起こす恐れがあるため]。
5　長時間至近距離で同一部位を観察せず、照射光や照射時間は必要最低限にすること[熱傷を引き起こす恐れがあるため]。
6　使用直後は、光源差込部が熱くなっているので、この部分には触れないこと[熱傷を引き起こす恐れがあるため]。

【形状・構造及び原理等】
≪形状・構造≫
型式：FG-29V

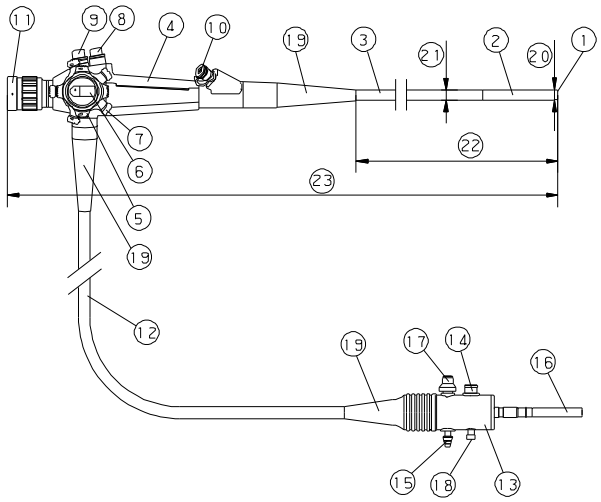

全長：1395 mm（参考値）
質量：1000 g（参考値）

No	名称	No	名称
1	先端部（変性 PPO、ステンレス鋼、光学ガラス、エポキシ樹脂、液状シリコーンゴム）	11	接眼部
		12	ライトガイドケーブル
		13	コネクター部
2	湾曲部（フッ素ゴムと HNBR の混合物、エポキシ樹脂）	14	送気・送水口金（ステンレス鋼、銅ロウ、はんだ、エポキシ樹脂、シリコーンゴム、シリコーンオイル）
3	軟性部（ポリウレタン、ウレタン樹脂）	15	吸引口金
4	操作部	16	光源差込部
5	左右アングルノブ	17	通気口金
6	左右アングルロックレバー	18	帰還端子
7	上下アングルノブ	19	補強ゴム
8	送気・送水ボタン（ステンレス鋼、シリコーンゴム、シリコーンオイル、フッ素ゴム）	20	先端硬性部径
		21	軟性部径
9	吸引ボタン（ステンレス鋼、シリコーンゴム、シリコーンオイル、フッ素ゴム）	22	挿入部（有効長）
10	鉗子口及び鉗子栓（ステンレス鋼、シリコーンゴム、シリコーンオイル、銅ロウ）	23	全長
		-	内部管路（ステンレス鋼、PTFE、銅ロウ、はんだ、エポキシ樹脂、PVDF）

取扱説明書を必ずご参照下さい。

6217001H038S

*≪仕様≫

項目		仕様
視野方向		0°（直視型）
視野角		100°
観察深度		3 ～ 100 mm
接眼視度調整範囲		+3 ～ -8 Dptr.
湾曲角	上／下	210° ／ 120°
	左／右	120° ／ 120°
挿入部最大径		φ 11.35 mm
軟性部径		φ 9.8 mm
先端硬性部径		φ 9.8 mm
チャンネル最小径		φ 2.7 mm
有効長		1050 mm

*≪原理等≫

医用内視鏡用光源装置（以下、光源装置）から伝達される照明下で、観察対象の観察像を捕らえ、光ファイバー束により接眼部まで伝送し、接眼レンズで拡大し、目的部位の観察を行う。
また、操作部本体の鉗子口から処置具類を挿入して処置を行う。

*【使用目的又は効果】

体内、管腔、体腔、又は体内腔に挿入し、胃から十二指腸の観察、診断、撮影又は治療のための画像を提供すること。

*【使用方法等】

一般の上部消化管内視鏡検査法に従って使用する。

1 検査準備
(1) 患者は検査当日、朝から絶食させる。
(2) 検査の 15～30 分前に分泌抑制剤、筋緊張緩和剤等の処置を行い、必要に応じて内視鏡挿入直前に、咽頭麻酔を施すこと。
(3) 内視鏡等は、使用前に必ず再処理を行う。
(4) 組み合わせて使用する光源装置に送水タンク等の外部接続機器を接続する。
(5) 内視鏡の光源差込部を光源装置に差し込み、送気・送水口金を送気・送水装置に、吸引口金を吸引装置に、各々のチューブを介して接続する。
(6) 使用前点検として、内視鏡の外観、湾曲機能、送気・送水機能、吸引機能、光源装置からの照明光が適正であること、接眼部の画像を確認し、異常がある製品は使用しないこと。

2 内視鏡の挿入及び検査
(1) 内視鏡の挿入時には、送気・送水ボタン上部にある通気口を塞いで送気ノズルから臓器管腔内へ空気を送り、粘膜壁と内視鏡の先端との間に距離を取りつつ、観察を行う。
(2) 内視鏡先端の対物レンズに付着物や曇りがある場合は、送気・送水ボタンを押して送水ノズルから送水し、対物レンズを洗浄する。対物レンズに水滴が残るときは、送気・送水ボタンの通気口を塞いで送気ノズルから送気し、対物レンズ面の水滴を除去する。
(3) 粘液等の分泌物が多い時は、吸引ボタンを押して、これを吸引し、粘膜が露出してから内視鏡検査を行う。
(4) 臓器内粘膜面の観察に加えて、次の補助的操作を行うことができる。
- 鉗子口より生検鉗子あるいは、細胞診ブラシを挿入して組織細胞標本を採取する。
- 内視鏡の接眼部に写真撮影装置あるいは、テレビカメラ装置などを装着して、粘膜面の性状を撮影し、複数人での観察に使役する。

(5) 内視鏡の抜去時は、粘膜面を観察しながら、臓器内に送り込んだ空気を吸引除去しつつ内視鏡を静かに引き抜く。

3 使用後の手入れ
(1) 使用した内視鏡等は、取扱説明書に従い再処理を行う。

*≪使用方法等に関連する使用上の注意≫

組み合わせて使用する医療機器については、取扱説明書を参照すること。

1 使用前準備時の注意
(1) 加温式洗浄、消毒機を使用した場合は、室温まで空冷させた後、使用すること。

2 洗浄、消毒／滅菌方法の注意
(1) 液体に浸漬する際は、事前に、漏水試験を行い、防水性を確認の上、EOG キャップは取外すこと。
(2) 自動洗浄、消毒、滅菌装置を使用する場合は、装置のメーカーに、本製品に対する洗浄、消毒、滅菌の妥当性を確認すること。

*【使用上の注意】

*≪重要な基本的注意≫

1 【使用目的又は効果】に示した目的以外には使用しないこと。
2 挿入、抜去、湾曲操作、送気、送水等は、患者の状態に注意し、画像を見ながらゆっくり行うこと[組織損傷や出血等につながる恐れがあるため]。
3 アングルノブ、アングルロックレバーに過度の力をかけないこと[先端湾曲部作動不具合の原因になるため]。
4 軟性部／ライトガイドケーブルの接続部分（≪形状・構造≫⑲補強ゴム）を捻ったり無理に曲げたりしないこと[機器破損の原因になるため]。洗浄時にも注意すること。
5 落下等、強い衝撃を受けた機器は、内部が故障している可能性があるので使用しないこと。
6 当社指定の専門家以外による分解、改造、修理は行わないこと。異常が疑われる場合は、使用せず、当社まで連絡すること。
7 処置又は洗浄に使用した製品や付属品（例えば、鉗子、針、スネア、ブラシなど）は、使用後それらに損傷がないこと、また、管路内に落下し詰まっている部品がないことをよく確認すること。さらに、管路を通したクリップ、ステントなどの処置具について、使用前後の総数に相違がないことを確認すること。異物の蓄積や除去できない付属品、その他の原因により管路が詰まった場合、詰まりを除去しようとしたり、その内視鏡を使用し続けたりせず、当社に問い合わせの上、修理すること[管路が詰まった状態で内視鏡を使用した場合、効果的な再処理が行えなかったり、異物や機器の構成部品がその後の手技中に患者体内へ脱落したりすることにより、交差感染を引き起こす恐れがあるため]。
8 内視鏡挿入部外表面に、麻酔剤や潤滑剤等を、噴霧又は塗布すると、挿入部外皮部材のひび割れや剥離が発生し、部品の体内落下、組織損傷や感染をもたらすことがある。使用に先立ち、当社係員まで、確認すること。
9 鉗子口から挿入する処置具類等は、内視鏡との適合性が確認されている当社指定のものを使用すること。

*使用前の注意事項

1 使用前に、取扱説明書に従い点検し、異常が疑われる場合は使用しないこと。
2 使用前に、挿入部表面に異常（表面のキズ、表面の白濁、ひっかかり、剥離、脱落等）が無いことを確認すること[異常があれば内視鏡の内部機能の故障、部品の体内落下、組織損傷や感染の原因となる恐れがあるため]。湾曲部被覆ゴム前後の接着部分は、洗浄、消毒、滅菌等により、異常が発生することがある。ゴム手袋を着けた指の爪で接着剤を軽く掻き、剥離等、変化が発生しないことを確認し、少しでも異常の兆候がある場合は、使用しないこと。
3 使用前に、先端部の対物レンズ周辺の接着剤表面に、傷、白濁、剥離等が無く、光沢があることを確認すること。また、ガーゼで先端部を拭いて、接着剤がガーゼに付着しないことを確認すること。
4 使用前に、先端湾曲部が、最大範囲内を円滑に湾曲することを確認すること。少しでも異常の兆候がある場合は、使用しないこと。
5 使用する鉗子栓の内部、外部に、亀裂、摩耗、異物の付着や混入が無く、処置具挿入口に照明をかざして光が通過しないことを確認すること。少しでも異常がある鉗子栓は、使用しないこと。

*使用中の注意事項

1 検査中にライトガイドに汚物が付着したままになると、照明光により汚物が温められ、その水分が蒸発して湯気が発生する可能性がある。その場合、速やかに検査を中止し、注意しながらゆっくりスコープを抜去すること。取扱説明書に従って、スコープを洗浄して汚物を除去し、再処理を施した後、使用すること。
2 使用中に機器や画像、又は患者の状態に異常を感じた場合は、検査を中止し、湾曲を解除して、安全に注意しながら、内視鏡を患者から抜去すること。

***≪相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)≫**
併用注意(併用に注意すること)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア 再使用可能な電気手術向け内視鏡用スネア 単回使用内視鏡用能動処置具 再使用可能な内視鏡用能動処置具	高周波装置を併用する場合、フローティングタイプのものを使用し、高周波処置具は当社指定の絶縁タイプのものを使用すること。また、術者、介助者はゴム手袋、アイカップ等、適切な防御処置を講じること。	高周波処置具が患者、医療従事者、金属部品などに意図せず接触し熱傷を生じる恐れがある。
レーザー処置用能動器具 内視鏡用レーザガイド	レーザー装置を併用する場合、Nd-YAG レーザーを使用すること。また、保護めがね、レーザーカットフィルター等、適切な防御処置を講じること。	患者の熱傷や医療従事者の眼の損傷などを生じる恐れがある。
植込み型心臓ペースメーカ 植込み型両心室同期ペースメーカ 侵襲式体外型心臓ペースメーカ 非侵襲式体外型心臓ペースメーカ 経食道体外型心臓ペースメーカ 植込み型リードレス心臓ペースメーカ	ペースメーカ等を装着した患者に使用する際は、事前に専門医と協議し、十分な準備を行い、安全性を確認した上、使用するか判断すること。	電磁波により障害を及ぼす可能性があるため。

***≪不具合・有害事象≫**

重大な不具合
- 汚染
- 薬剤等の残留

その他の不具合
- 動作不良(過剰又は常時送気・送水、常時吸引、湾曲不良、湾曲解除不良、画像不良等)
- 処置具挿通不良
- 取付不良
- 薬剤の塗布や噴霧による劣化
- 剥離
- リーク
- 体液等の逆流
- 部品の摩耗
- 部品の損傷・破損
- 部品の脱落

重大な有害事象
- 感染
- 穿孔
- 出血
- 組織損傷
- 炎症
- 熱傷
- 感電
- アレルギー反応
- 血圧低下
- 体内遺残

その他の有害事象
- 吐き気

***【保管方法及び有効期間等】**
***≪保管方法≫**
1 換気の良い清潔な室内に保管すること。
2 高温多湿、直射日光、紫外線の当たる場所や、内視鏡のキャリングケースには保管しないこと。
3 再処理後は、取外し可能な部品は外し、操作部を上にし、伸ばした状態で吊るし、保管すること。

***≪耐用期間≫**
1 本製品の耐用期間は、下記の条件で、製造出荷後 6 年とする[自己認証(自社データ)による]。
   - 取扱説明書に従って、適切な、使用前点検、使用、使用後の手入れ、貯蔵、保管、消耗品の交換を行う。
   - 当社指定の専門家による、修理及び定期点検(1 年)を実施する。

***【保守・点検に係る事項】**
***≪使用者による保守点検事項≫**
1 使用前に、取扱説明書に従い、使用前点検を行い、異常が疑われる場合は、使用しないこと。
2 使用後は、耐薬品性のあるゴム手袋、マスク、ゴーグル、防水ガウン等を装着の上、直ちに、取扱説明書に従い、再処理を行うこと。
3 以下の部品は修理不可能な消耗品である。取扱説明書に従って使用前点検を行い、異常や劣化、摩耗があるときは、交換すること。
   - 鉗子栓
   - 送気・送水ボタン(O リング及び逆流防止弁交換可能)
   - 吸引ボタン(O リングのみ交換可能)
4 内視鏡や消耗品の廃棄の際には、法に従って適切に処理すること。

点検項目	頻度
内視鏡の点検	毎症例
付属品などの点検	毎症例
関連機器の点検	毎症例

詳細については取扱説明書を参照すること。

***≪業者による保守点検事項≫**
1 1 年に 1 度、当社指定の専門家による定期点検を受けること。
2 定期点検、修理は、下記に連絡すること。
3 保守部品の保有期間は 8 年とする。
4 保有期間が過ぎた場合、修理が不可能になるか、可能であっても、修理費用や修理期間が、保有期間内とは異なる場合がある。
5 保有期間内でも、本製品に使用されている部品のメーカーが、部品の製造、供給を中止した場合、修理が不可能になる場合がある。

点検項目	頻度
防水性の点検	1 年ごと
先端部の点検	1 年ごと
湾曲部の点検	1 年ごと
挿入部の点検	1 年ごと
操作部の点検	1 年ごと
ライトガイドケーブルの点検	1 年ごと
コネクターの点検	1 年ごと
湾曲作動の点検	1 年ごと

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**
**製造販売元
PENTAX Medical 合同会社
電話番号:0422-70-3960(日本営業本部)

6217001H038S