認証番号 第 222AFBZX00032000 号

** 2017 年 11 月改訂(第 4 版 新記載要領に基づく改訂)
* 2016 年 4 月 1 日改訂(第 3 版)

機械器具 (50) 開創又は開孔用器具
管理医療機器　単回使用開瞼器 (JMDN コード : 35349002)


イージースペック

再使用禁止

**【禁忌・禁止】
1. 使用方法
(1) 再使用禁止。
(2) 再滅菌禁止。

**【形状・構造及び原理等】
本品は、2つの開瞼鈎部及びそれを連結するアーム部からなる樹脂製の単回使用開瞼器である。

1. 形状

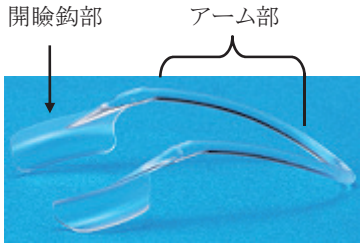

モデル	アーム径
TG-2(ソフトタイプ)	2.2mm
TG-4(ハードタイプ)	2.4mm

2. 材質
メタクリル樹脂

3. 原理
本品は、アーム部の戻る力により眼瞼を開けた状態に保持する。

**【使用目的又は効果】
眼科手術ないしは検査時に、眼瞼を開けた状態に保つ。

**【使用方法等】
[使用方法]
1. 滅菌バッグから無菌的に取り出す。
2. 開瞼鈎部を眼瞼に挿入し、アーム部の戻る力により開瞼する。

**【使用上の注意】
[その他の注意]
(1) 破損の原因になるため、開瞼器を開く方向に引っ張らないで下さい。

**【保管方法及び有効期間等】
[保管方法]
直射日光をさけ、なるべく涼しいところに保管して下さい。

[有効期間]
使用期限は、外箱に記載されています。[自己認証(当社データ)による]
(上 4 桁は西暦、下 2 桁は月を示す。)

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
*[製造販売業者]
HOYA 株式会社

[問い合わせ窓口]
HOYA 株式会社メディカル事業部
〒164-8545 東京都中野区中野 4 丁目 10 番 2 号
中野セントラルパークサウス 6F
電話番号 03-5913-2343