**2026 年 07 月(第 6 版)
*2025 年 02 月(第 5 版)

医療機器承認番号　21200BZZ00156000

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管

管理医療機器　　脳外科用イントロデューサ　　ＪＭＤＮコード　70322000

内視鏡用血腫除去クリアガイド (シース、HEG-1010P)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

** 〈使用方法〉

●再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

1．形状


1）本器は透明体材料のシースとストッパーから構成されている。

2）本器はマンドリン HEG-1010M と組み合わせて使用する。

2．原理

透明体材料のシースは頭蓋内の様子を内面から観察できるようになっている。また、挿入深度が判るように外装にメジャーが施されており、任意の深度で固定できる。

3．各部の名称

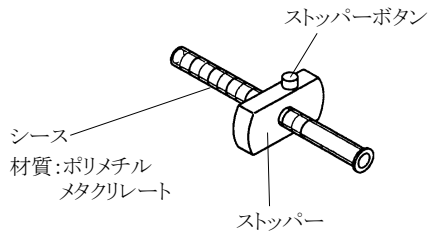

4．構成

① シース…… 3
② 発送用ケース …… 1
③ 取扱説明書…… 1

5．仕様

シース（HEG-1010P）

全長	100 mm
内径	φ8.0 mm
外径	φ10.0 mm

【使用目的又は効果】

本器は、頭蓋内に内視鏡や吸引嘴管等を誘導することを目的とする。

【使用方法等】

本器(シース/HEG-1010P)は単独で使用することはない。適合するマンドリンと組み合わせて使用する場合の一般的な使用方法は次のように行うこと。

1. 本器を事前に必ず点検すること。

2. 本器を使用前に必ず洗浄・滅菌すること。

** 洗浄・滅菌の方法は以下のとおりである。

〈洗浄方法〉

洗浄液の種類	酵素洗浄剤
薬品名	サイデザイム™
製造販売業者	ASP Japan (同)
使用法 (１回につき)	サイデザイム™　8mL を 1L の水で希釈 浸漬：1 分間

〈滅菌方法：過酸化水素低温プラズマ滅菌〉

装置名	ステラッド™100S
製造販売業者	ASP Japan（同）
使用法(１回につき)	Long サイクル 1 サイクル

〈滅菌方法：エチレンオキサイドガス(EOG)滅菌〉

装置名	ガスボンベ式滅菌装置
使用法 (１回につき)	缶内温度　50～55℃ 缶内湿度　50% 滅菌圧力　0.13MPa 滅菌時間　6～8 時間 エアレーション 10 時間 濃　　度　EO 20%、CO_2 80%

3. 挿入前に挿入深度に合わせたストッパー位置の調節を行ってから、シースにマンドリンを挿入すること。

4. 被検者への挿入は静かにゆっくりと行うこと。目的部位に到達したことを確認してからマンドリンを抜去すること。

取扱説明書を必ずご参照ください。

5. この状態でシース内に内視鏡、吸引嘴管の挿入が可能となる。

6. 被検者からシースを引き抜く場合、およびシースから内視鏡吸引嘴管を引き抜く場合は、静かにゆっくりと行うこと。

7. 操作や使用方法に関する詳細については、取扱説明書の「〔7〕使用方法」を参照すること。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

・本器に、抵抗感を感じるような曲げ、ひねりおよび衝撃を与えないように取り扱うこと。［破損のおそれがあるため。］

・本器は次のような環境で使用すること。
使用環境 ： 周囲温度　10 ～ 40℃
相対湿度　30 ～ 75%
気　　圧　700 ～ 1060hPa

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

・本器の操作時および取扱時には、落下させないように注意すること。万一落としてしまった場合は、再使用しないで新たな製品を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管は直射日光や高温多湿を避けて次のような環境で行うこと。

保管環境 ： 周囲温度　10 ～ 40℃
相対湿度　30 ～ 75%
気　　圧　700 ～ 1060hPa

【保守・点検に係る事項】

〈使用者による保守点検事項〉

1．点検

・使用前は、取扱説明書の「〔7〕使用方法」に記載された点検を行うこと。

・使用前に、次のような項目の点検を行うこと。

・使用する内視鏡や吸引嘴管がシースに挿入できること。

・シースにわれや変形がないこと。

・ストッパーが適切に機能すること。

2．洗浄方法

・使用前および使用後は、取扱説明書の「〔7〕使用方法」に記載された洗浄を行うこと。

・本器の洗浄は酵素洗浄剤で行うこと。

3．滅菌方法

・使用前および使用後は、取扱説明書の「〔7〕使用方法」に記載された滅菌を行うこと。

＊・本器の滅菌は次の方法によって行うこと。
** 1）過酸化水素低温プラズマ滅菌
2）酸化エチレンガス（EOG）滅菌

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社町田製作所

製造業者

株式会社町田製作所

販売業者の連絡先

株式会社町田製作所

〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子 1-15-12
電話 04-7165-3083

取扱説明書を必ずご参照ください。

C0074E