*2025 年 2 月改定（第 2 版）
2024 年 9 月作成（第 1 版）

医療機器認証番号　306ABBZX00026000


類別：機械器具 ３７ 医療用匙
管理医療機器 一般的名称：単回使用眼科用鋭ひ
ＪＭＤＮコード：３２７７２００２

*販売名：マニートラベクロトミーフック

再使用禁止

[禁忌・禁止]
〈使用方法〉
再滅菌禁止、再使用禁止

[形状・構造及び原理等]
1. 形状

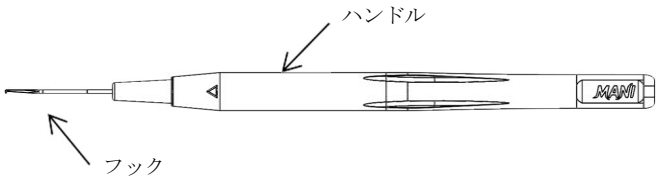

フック先端部形状



2. 材質
フック：ステンレス鋼（ニッケル・クロム含有）
ハンドル：ポリブチレンテレフタレート

[使用目的又は効果]
線維柱帯等の眼組織の切除に用いる。

[使用方法等]
1. 滅菌包装を、無菌的に開封する。
2. ケースから先端部が周囲に触れないように慎重に取り出す。
3. 本製品の先端部を対象組織に刺入し、操作することで眼組織の切除を行う。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉
金属部は、折損、曲り等の可能性があるため、必要以上の荷重を加えないこと。

[保管方法及び有効期間等]
1. 保管方法
高温、多湿、直射日光及び水濡れを避けて保管すること。
2. 有効期間
適切な方法で保管した場合の使用期限は、個装及び外箱ラベルに記載。［自己認証（自社データ）による］

[製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等]
製造販売元
マニー株式会社
〒321-3231
栃木県宇都宮市清原工業団地 8 番 3

問合せ・連絡先
028-667-9911（営業）