添付文書

2025 年 1 月（第 1 版）　　医療機器届出番号：13B2X10309ANS002

機械器具 25　医療用鏡


一般医療機　　自然開口向け単回使用内視鏡用感染防止シース　JMDN コード：70172000

Stylet-Go ビデオスコープ用シース

再使用禁止

【禁忌・禁止】
使用方法
・再使用禁止［交差感染の恐れ］

【形状・構造及び原理等】
1. 外観形状

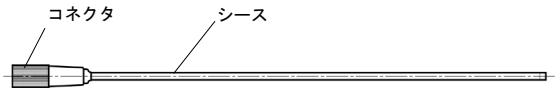

	シース長	外径
硬性内視鏡（小児）用	240 mm	φ3.6 mm
硬性内視鏡（成人）用	370 mm	φ4.6 mm
軟性内視鏡用	480 mm	φ3.6 mm

2. 原材料
ポリアミド樹脂、熱可塑性エラストマー、ナイロン 12
アクリル樹脂系接着剤、エポキシ系接着剤

【使用目的又は効果】
自然開口向けの内視鏡使用時に、内視鏡に装着し、粘膜や血液・体液等に内視鏡挿入部が直接接触することを防止、保護するカバーである。

【使用方法等】
1. 使用方法
1）本品の近位端側の包装を開きます。
2）挿管用喉頭鏡を、シースに挿入します。
3）挿管用喉頭鏡を、先端のチップが折れないように気をつけながら先端まで挿入します。
4）コネクタを回して、本品を挿管用喉頭鏡に固定します。

2. 組合せて使用する医療機器
本品と組み合わせて使用する医療機器は以下のとおりである。

販売名（一般的名称）	医療機器認証番号
Stylet-Go ビデオスタイレットスコープ（ビデオ硬性挿管用喉頭鏡）	306AFBZX00101000
Stylet-Go ビデオフレキシブルスコープ（ビデオ軟性挿管用喉頭鏡）	307AFBZX00003000

【使用上の注意】
重要な基本的注意
・使用前に先端のレンズをねじったり、絞ったりしないこと
［レンズが緩んだり、固定位置から外れたりするおそれ］

【保管方法及び有効期間等】
1. 保管方法
水濡れに注意し、直射日光、高温多湿及び衝撃等を避けて保管すること。

2. 有効期間
製造日より 3 年［自己認証（当社データ）による］

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：丸文株式会社
東京都中央区日本橋大伝馬町 8 番 1 号
TEL：03-3639-9805

外国製造業者：OPCOM Medical Inc.（台湾）
（オプコム メディカル）

併用する内視鏡の取扱説明書も併せてご参照ください。