

機械器具(71) 視力補正用眼鏡
一般医療機器 眼鏡(JMDN コード: 35065000)

TALEX オリジナル Stretch02 DUAL（老眼鏡）

【禁忌・禁止】


- 立っている際に違和感が生じた場合、使用しないこと
- 度数の合わない状態で長時間使用しないこと。
→頭痛などの体調不良を起こす可能性がある。
- 目を保護するためのものではありません。
製品に強い衝撃を与えないこと。

【形状・構造及び原理等】

■構成

フレーム	：プラスチック
ノーズアーム	：金属
ノーズパッド	：ゴム
レンズ	：プラスチック偏光二重焦点レンズ
老眼鏡	：度数 +1.50 から+3.00 ※0.50 刻み
フレーム形状	：TALEX オリジナル Stretch02

■形状・構造

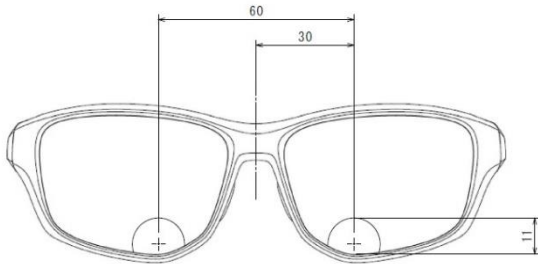

動作原理

適切な度数のレンズを用いて網膜上に結像させることにより視力を補正する。

【使用目的または効果】

- フレームとレンズからなる
手元視力補正用サングラス（眼鏡）

【使用方法等】

- 通常のサングラス同様に着用する。
手元を確認したい場合は
視線を下にずらし、丸玉に焦点を合わせる。

【品目仕様等】

- レンズ・フレーム外観の検査（検眼器・社内検査基準に基づく）

【使用上の注意】

- 携帯画面（スマートフォン）の表示画面、車のナビゲーション画面、乗り物の計器類、パソコンの液晶画面、液晶テレビ、デジタル腕時計など、偏光板を仕様した表示画面は、機種や見る角度によって暗くなったり歪みが見えることがあります。
- 車のフロントガラスに強化ガラスが使用された 1987 年製以前の日本車の場合、偏光レンズにより見え方が不適当になる可能性があります。
- オートバイなどヘルメットシールドは一部素材によって歪みが見え、視界が不適当になる場合があります。
- 車種によっては、ヘッドアップディスプレイが見えづらくなる場合があります。
- 故意に変形・改造したり傷を付けないでください。フレームレンズ共に素材の劣化の原因となります。

【保管方法および有効期間等】

- 専用ケースに入れ、直射日光や高温を避け、室内で保管ください。
- 有効期限はありません。

【保守・点検に係る事項】

- 使用者は洗浄後にレンズを長時間水の中へ放置しないように保管ください。水を使用して洗浄は可能ですが、洗浄後は必ず水気を拭き取ってください。レンズに内蔵している雑光®カットフィルターが水分を吸収し変色、劣化、剥離する恐れがあります。
- 洗剤を使用する場合はレンズ・フレーム共に中性洗剤のみを使用ください。
- 製品への傷防止のため、汚れを拭き取る際は柔らかい布で拭き取ってください。

【製造販売業者および製造者の氏名または名称等】

製造販売業者
名称：株式会社タレックス
住所：大阪府大阪市東住吉区今川 5-1-32
電話：06-6705-2724