


器 0 1 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ (70469000)

若杉氏側部支持器
(レール固定金具 小型 Ver.2)

【警告】
患者の任意の体位を確保するためにアクセサリで支持するときには常に患者の状態を監視すること。
[長時間の体位は神経麻痺や褥瘡の原因となることがあります。]

【禁忌・禁止】
1. 弊社製手術台以外では使用しないこと。
[レール固定金具及び手術台のサイドレール寸法が異なるため固定できません。]
2. 固定ハンドルが緩んだ状態で使用しないこと。
[支持器が動いて患者に障害が起きることがあります。]

* 【形状・構造及び原理等】

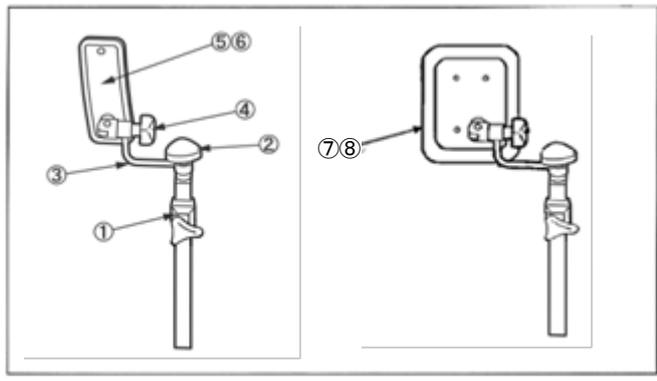

- ① レール固定金具 小型 Ver.2
- ② アーム固定ハンドル
- ③ アーム
- ④ パッド固定ハンドル
- ⑤ パッド (標準型)
- ⑥ パッド (X線透過型)
- ⑦ パッド (140×180型)
- ⑧ パッド (65×70型)

| 商品コード | 商品名 | 構成 | 質量 |
|-----------|--|-----------|------------|
| 08-069-40 | 若杉氏側部支持器 (パッド 140mm×180mm) 310mm (固定金具小 ver.2 付) | ①②③ ④⑦ | 2.2 kg (注) |
| 08-069-42 | 若杉氏側部支持器 X線透過型 310mm (固定金具小 ver.2 付) | ①②③ ④⑥ | 1.6 kg (注) |
| 08-069-44 | 若杉氏側部支持器 310mm (固定金具小 ver.2 付) | ①②③ ④⑤ | 1.9 kg (注) |
| 08-069-46 | 若杉氏側部支持器 (恥骨用) | ①②③ ④⑧ | 1.7 kg (注) |
| 08-111-11 | レール固定金具 小型 Ver.2 | ① | 0.4 kg |

注) レール固定金具 小型 Ver.2 の質量 0.4 kg を含む


材質

本体 (支柱・アーム) : ステンレス鋼
 本体 (パッド) : 発泡ウレタン/ステンレス鋼
 (X線透過型は発泡ウレタン/ポリエチレンテレフタレート)
 本体 (固定ハンドル) : ステンレス鋼/樹脂
 レール固定金具 小型 Ver.2 : ステンレス鋼/アルミ合金

* 【使用目的又は効果】


手術台に付属するアクセサリ。側臥位のポジションを確保する目的で、患者を支持する器具。

* 【使用方法等】

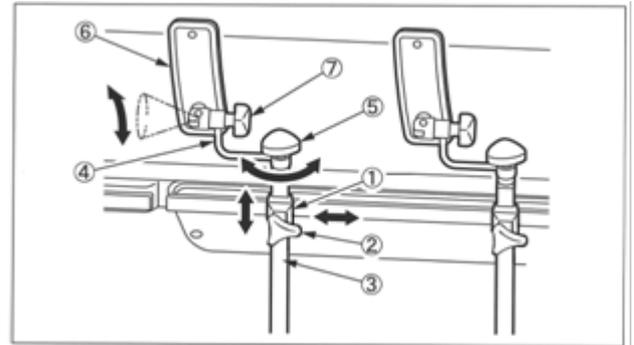

- ① レール固定金具 小型 Ver.2
- ② 固定ハンドル
- ③ 支柱
- ④ アーム
- ⑤ アーム固定ハンドル
- ⑥ パッド
- ⑦ パッド固定ハンドル

1. 手術台のサイドレールにレール固定金具①を取り付ける。
2. 支柱③をレール固定金具①に差し込み、固定ハンドル②を締めて仮止める。
3. 患者の体位に合わせてアーム④を動かし位置を調整する。
4. 調整後、固定ハンドル②およびアーム固定ハンドル⑤を回してレール固定金具①およびアーム④を固定する。
5. パッド固定ハンドル⑦を緩めてパッド⑥の角度を調整する。
6. 調整後、パッド固定ハンドル⑦を締めてパッド⑥を固定する。

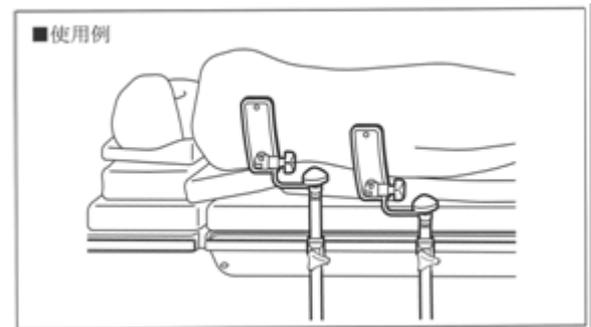

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1-1 手術台を作動するときは他のアクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意すること。
- 1-2 2個以上の側部支持器で患者を支持すること。

2. 相互作用

[併用注意]
 分離式手術台での使用は分離時にストレッチャーレール受けに接触しない位置まで移動させること。接触するとテーブルトップの分離ができず本品及び併用機器が破損することがある。

* **【保管方法及び有効期間等】**

1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管すること。

2. 耐用期間

指定した保守点検及び適切な保管をした場合：7年（注）
（自己認証）

* **【保守・点検に係る事項】**

＜使用者による保守点検事項＞

1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

2. 清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。

3. 故障時のお願い

本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

＜業者による保守点検事項＞

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

* **【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者

ミズホ株式会社

TEL 03-3815-3096

製造業者

ミズホ株式会社 千葉工場

* **【保証期間に係わる事項】**

本品は納品/設置してから一年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。