

器 0 1 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ （70469000）

ロート及び汚物缶

＊ ＊

【禁忌・禁止】


＜使用方法＞

1. 商品名と異なる手術台で使用しないこと。〔外形及びロート架の寸法が異なるため装着できません。〕
2. 他社製手術台では使用しないこと。〔他社製手術台での使用可能は確認していません。〕


＊ ＊
＊ ＊

【形状・構造及び原理等】

1. 外観図

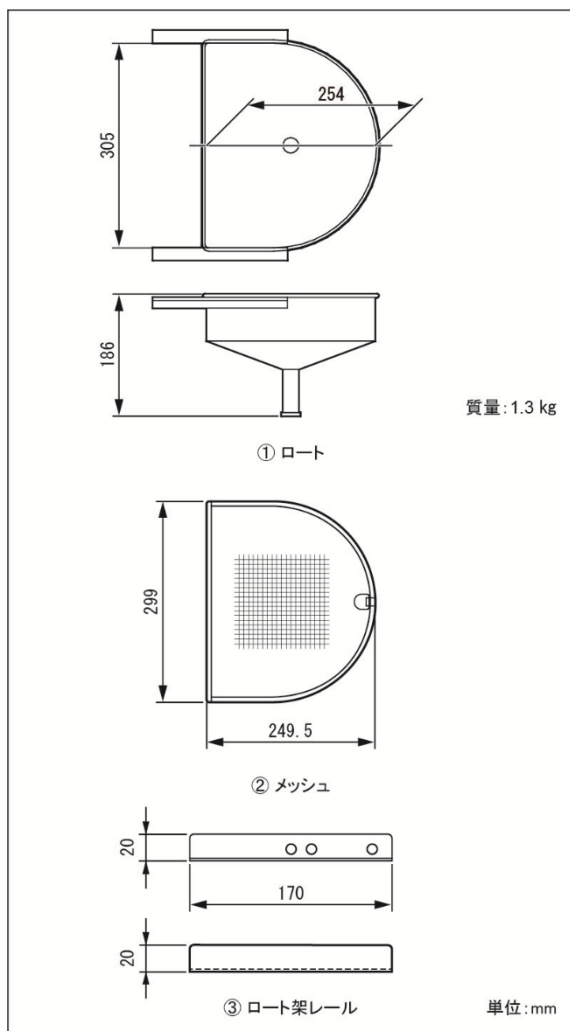


商品コード	商品名	構成
08-095-08	ロート及び汚物缶 5601 SRM/5601 SRMK用	①②③ ④⑤

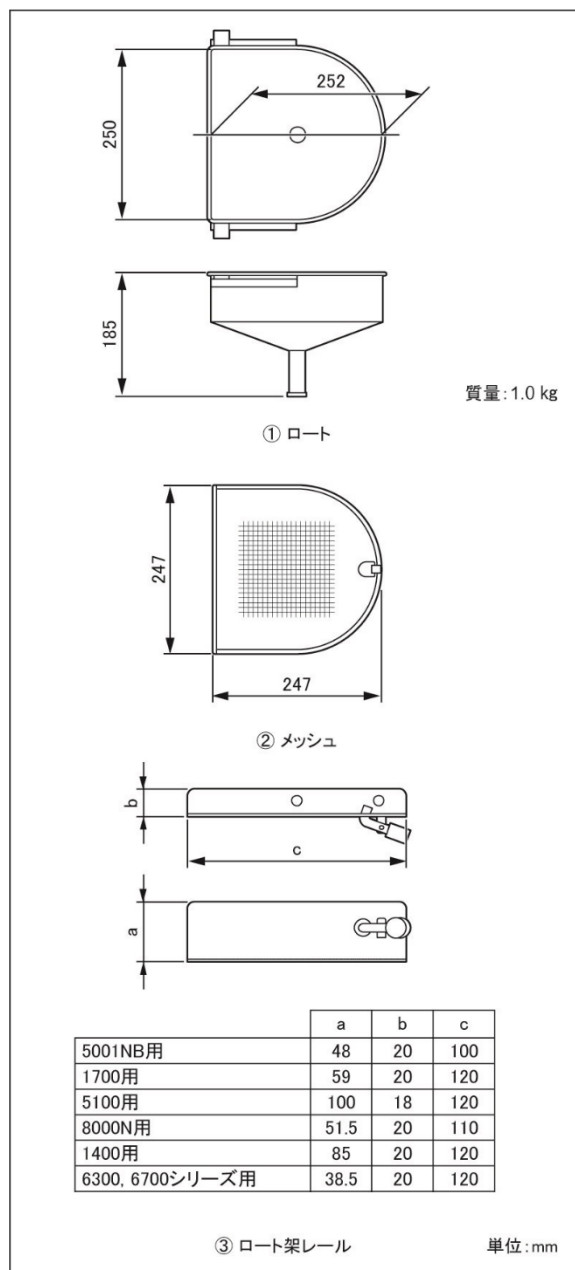


	a	b	c
5001NB用	48	20	100
1700用	59	20	120
5100用	100	18	120
8000N用	51.5	20	110
1400用	85	20	120
6300, 6700シリーズ用	38.5	20	120

商品コード	商品名	構成
08-095-03	ロート及び汚物缶 5001NB用	①②③ ④⑤
08-095-04	ロート及び汚物缶 1700用	①②③ ④⑤
08-095-05	ロート及び汚物缶 5100用	①②③ ④⑤


商品コード	商品名	構成
08-095-06	ロート及び汚物缶 8000N用	①②③ ④⑤
08-095-14	ロート及び汚物缶 1400用	①②③ ④⑤
08-095-16	ロート及び汚物缶 6300, 6700シリーズ用	①②③ ④⑤

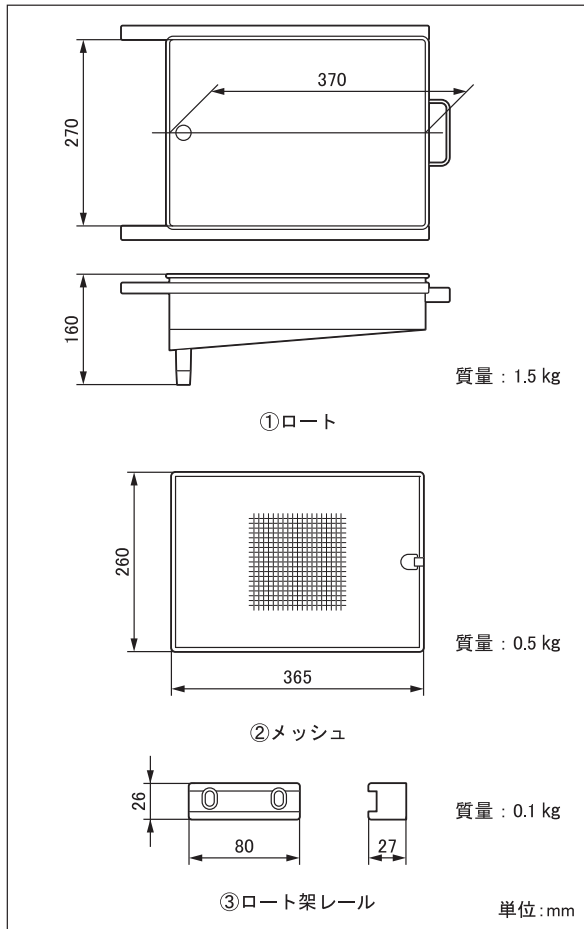

商品コード	商品名	構成
08-095-13	ロート及び汚物缶 5801, 3500, 3600シリーズ用	①②③ ④⑤

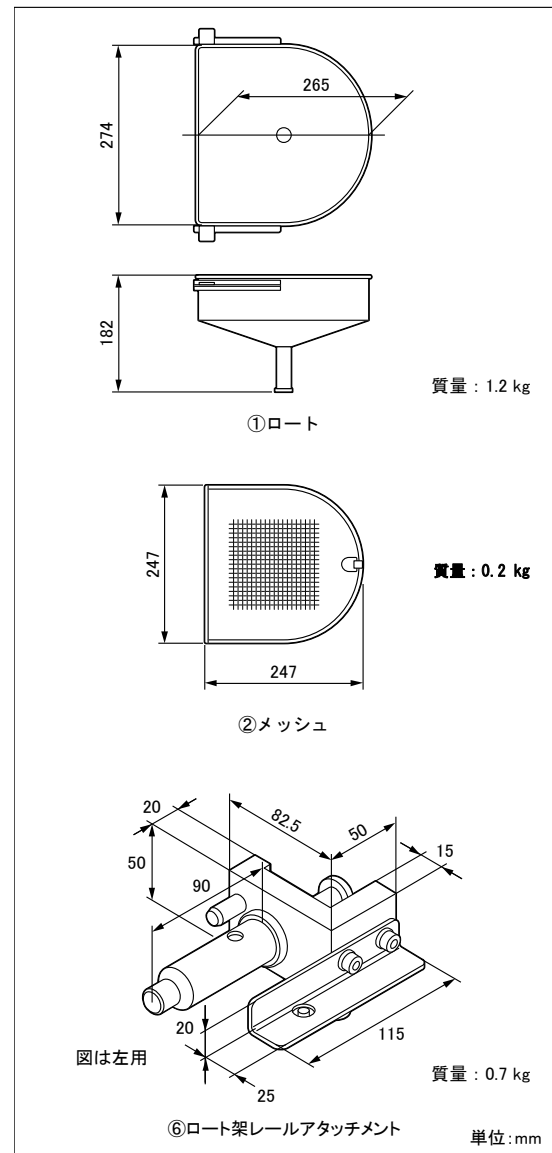

商品コード	商品名	構成
08-095-15	ロート及び汚物缶	①②④⑤⑥

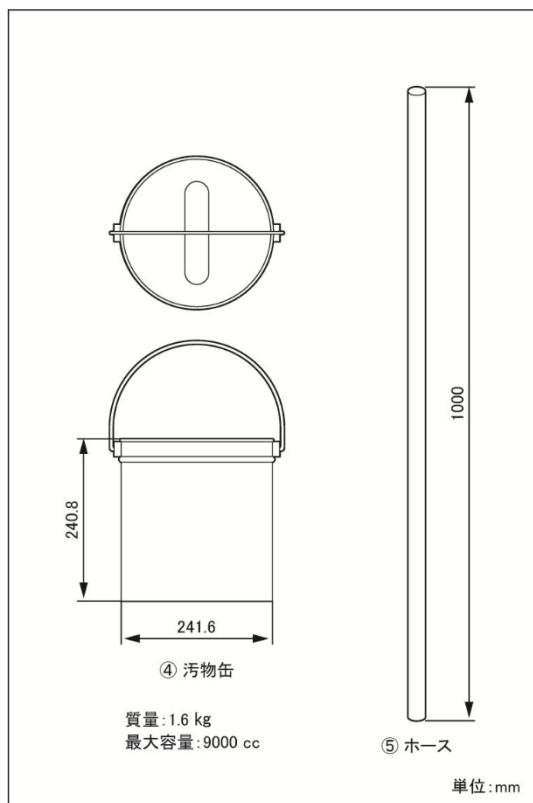

商品コード	商品名	構成
08-095-20	汚物缶及びホースセット	④⑤

2. 原材料

- ① ロート : ステンレス鋼
- ② メッシュ : ステンレス鋼
- ③ ロート架レール : ステンレス鋼
- ④ 汚物缶 : ステンレス鋼
- ⑤ ホース : ナイロン
- ⑥ ロート架レールアタッチメント : ステンレス鋼・アルミニウム合金

注: 番号は1. 外観図の番号に対応


**【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリをいう。婦人科または泌尿器科等の手術洗浄に使用する器具。


**【使用方法等】

- * <5601SRM/5601SRMK用・5801, 3500, 3600シリーズ用>


1. ロートの取り付けかた
(図は5601SRM/5601SRMK用)

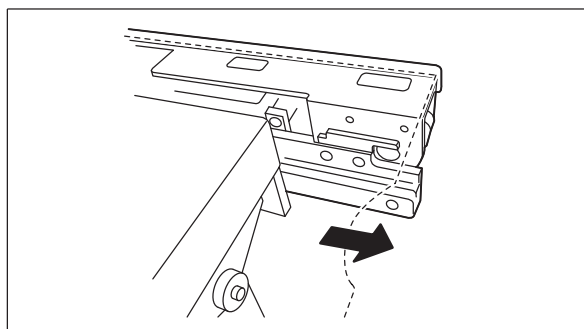


1-1 ロート架レールを取り付けられるスペースを確保するまで脚側にスライドします。

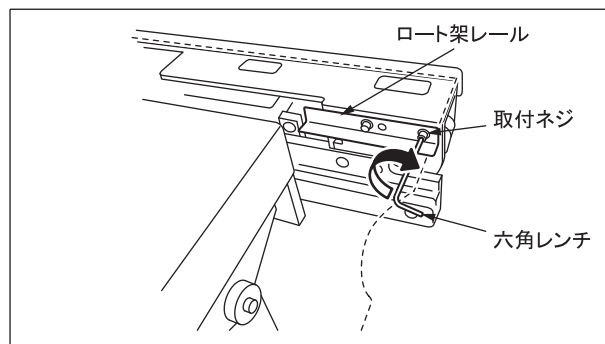

1-2 六角レンチを使って、ロート架レールを取付ネジで手術台に取り付けます。

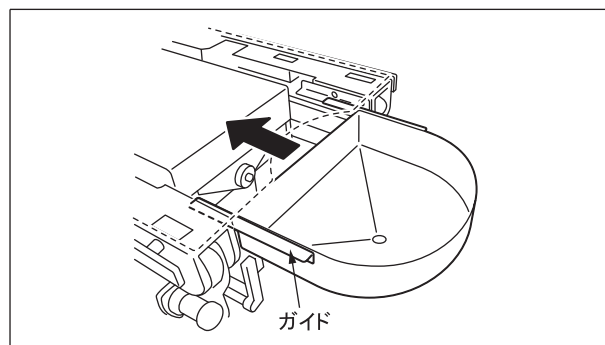

1-3 ロートのガイド(左右)をロート架レールに合わせて、ロートが止まるまで差し込みます。

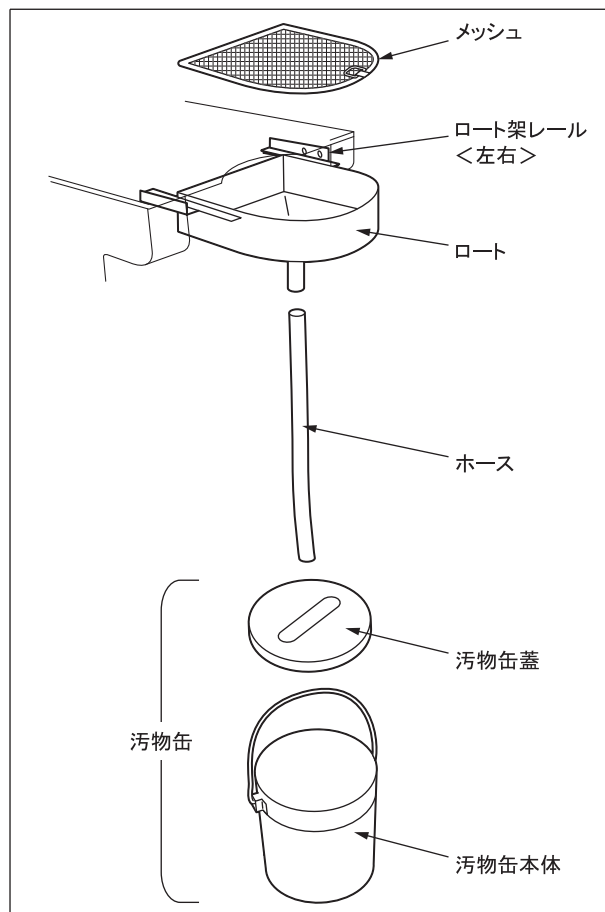


1-4 ロートにメッシュ・ホース・汚物缶を取り付けます。

2. ロートの外しかた

(図は5601SRM/5601SRMK用)


2-1 ロートからメッシュ・ホース・汚物缶を取り外します。

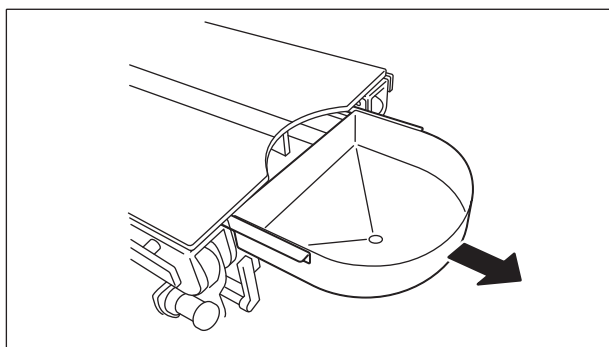


2-2 ロートを手前に引きます。

<5001NB用・1700用・5100用・8000N用・
1400用・6300, 6700シリーズ用>


1. ロートの取り付けかた

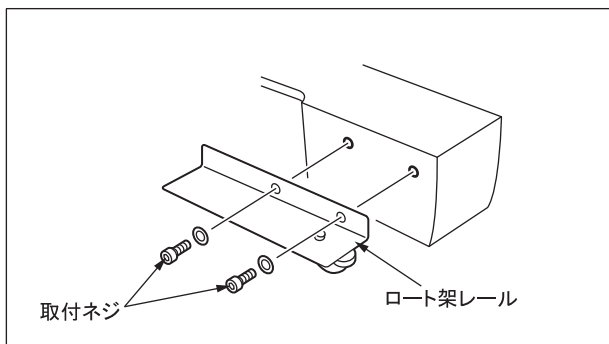

1-1 六角レンチを使って、ロート架レールを取付ネジで手術台に取り付けます。

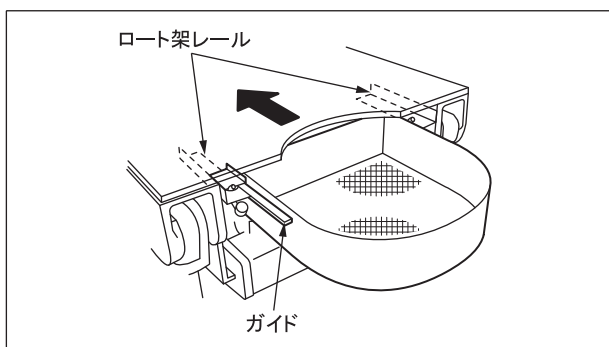

1-2 ロートのガイド (左右) をロート架レールに合わせて差し込みます。

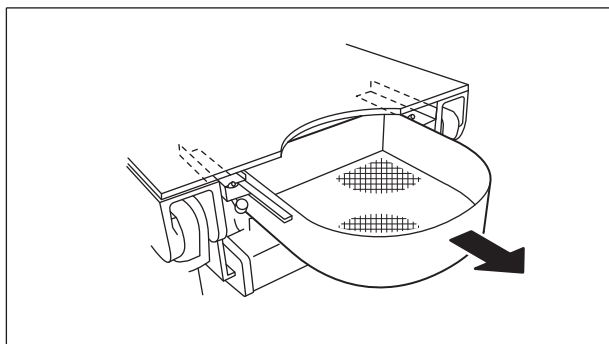


1-3 ロートを手前に引いてストッパーが機能してロートが外れないことを確認します。

1-4 ロートにメッシュ・ホース・汚物缶を取り付けます。

※5601SRM/5601SRMK用と同じなので図は省略

2. ロートの外しかた


2-1 ロートからメッシュ・ホース・汚物缶を取り外します。

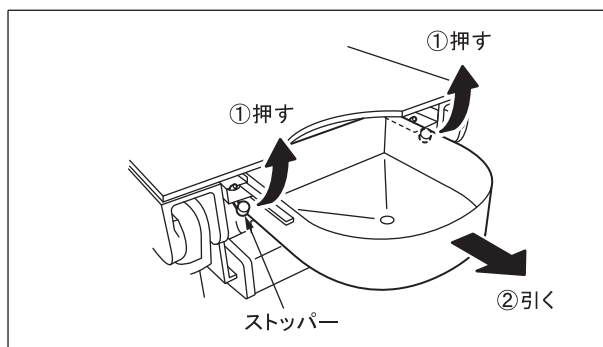


2-2 ロート架レールのストッパーを押した状態で、ロートを手前に引きます。

<08-095-15>


1. ロートの取り付けかた

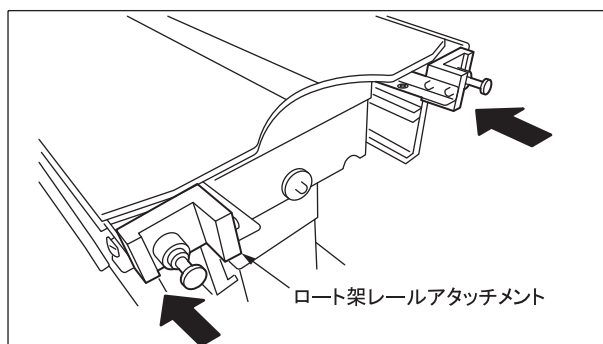

1-1 手術台左右の脚板差込孔にロート架レールアタッチメントを取り付けます。

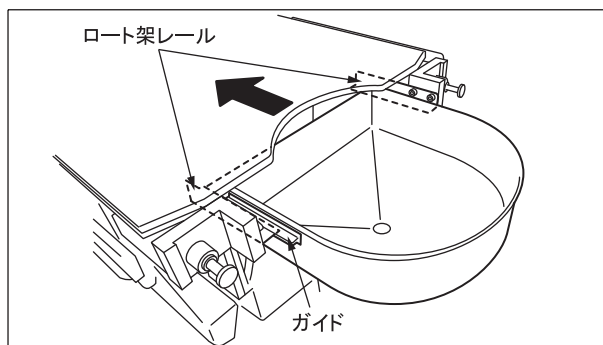

1-2 ロートのガイド (左右) をロート架レールに合わせて差し込みます。

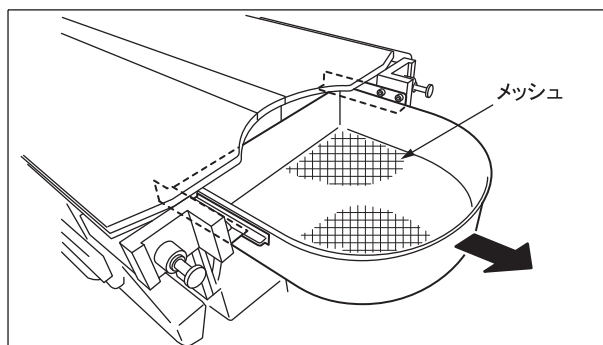


1-3 ロートを手前に引いてストッパーが機能してロートが外れないことを確認します。

1-4 ロートにメッシュ・ホース・汚物缶を取り付けます。


※5601SRM/5601SRMK用と同じなので図は省略

2. ロートの外しかた

2-1 ロートからメッシュ・ホース・汚物缶を取り外します。

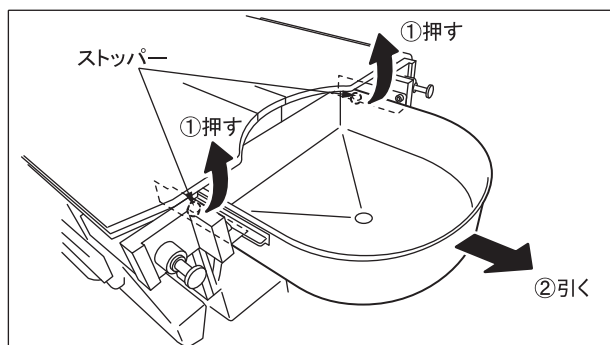

2-2 ロート架レールのストッパーを押した状態で、ロートを手前に引きます。

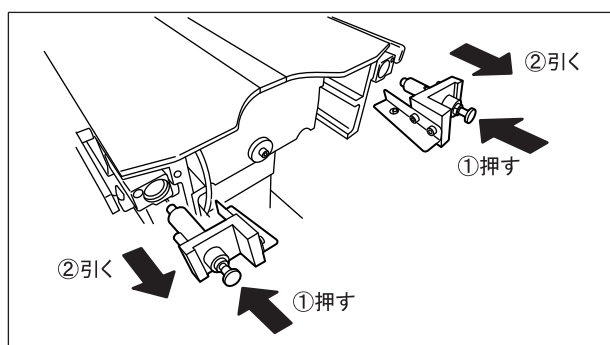

2-3 ロート架レールアタッチメントのツマミを押した状態で、手前に引いてアタッチメントを外します。

3. 故障時のお願い

本品が故障したと思われるときは、本品に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

<業者による保守点検事項>

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社
TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社 千葉工場

保証期間に係る事項

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。

**【使用上の注意】

* 重要な基本的注意

1. 手術台を作動するときは他のアクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。
2. ロートを取り付けた状態で手術台を頭方向にスライド又は縦転操作をしないでください。ロートが破損、又は脱落するおそれがあります。
3. ロート架レールアタッチメントのストッパー位置からロートを昇降支柱側へ押し込まないでください。ロートが脱落するおそれがあります。(08-095-15)

**【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

2. 耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：7年（注）

[自己認証（弊社データ）による]

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

**【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

2. 清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れを水で拭き取り、消毒液を浸したガーゼ等で清拭してください。なお、消毒液は弊社製手術台にて確認済みの消毒液と同一のものをご使用ください。確認済みの消毒液については手術台の取扱説明書をご参照ください。