

器01 手術台及び治療台  
 一般医療機器 手術台アクセサリ (70469000)



横方向延長板

**【警告】**  
 患者の任意の体位を確保するために手術台アクセサリで支持するときは常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位は神経麻痺や褥瘡の原因となります。]

**【禁忌・禁止】**  
 1. 他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での取付可能は確認していません。]  
 2. 横方向延長板のサイドレールに、上肢台及びスクリーン掛以外のアクセサリを取り付けないこと。[上肢台及びスクリーン掛以外のアクセサリを取り付ける事を想定していません。]

【形状・構造及び原理等】

\*\* 1. 外観図

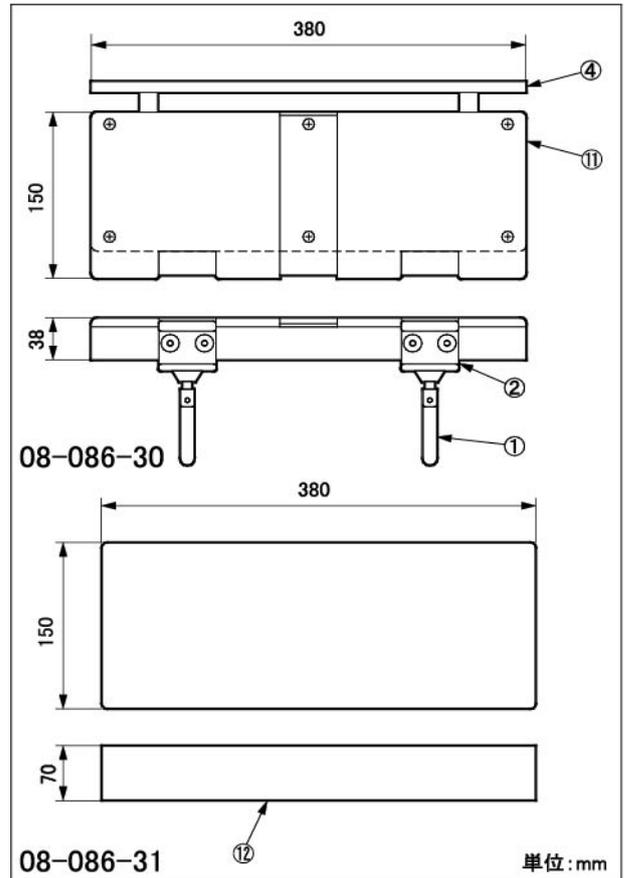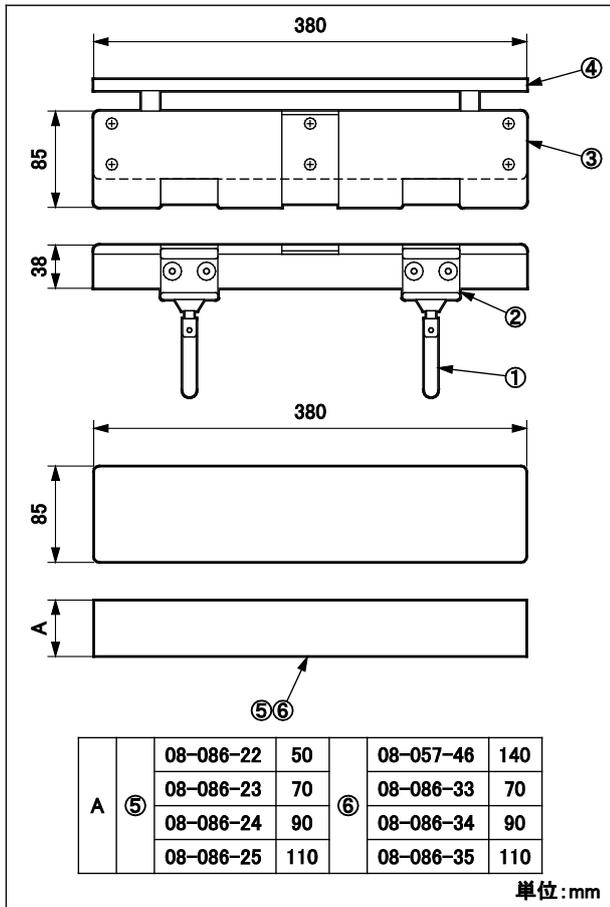

商品コード	商品名
* 08-057-46	横方向延長板MOPマットレス 140mm厚
08-086-06	横方向延長板 本体のみ 注
08-086-06-R1	横方向延長板 本体のみ (R1) 注
08-086-06-R2	横方向延長板 本体のみ (R2) 注
08-086-22	横方向延長板マットレス 50mm厚
08-086-23	横方向延長板マットレス 70mm厚
08-086-24	横方向延長板マットレス 90mm厚
08-086-25	横方向延長板マットレス 110mm厚
08-086-33	横方向延長板用70mm厚 (MOP)
08-086-34	横方向延長板用90mm厚 (MOP)
08-086-35	横方向延長板用110mm厚 (MOP)
** 08-086-30	横方向延長板 幅広 本体のみ
** 08-086-31	横方向延長板マット 幅広 70mm厚 (MOP)

注: 取付可能な手術台サイドレール寸法 (厚さ×高さ) 単位:mm

- \*\* 08-086-06、08-086-30 9×32
- \* 08-086-06-R1 9.4×28.6
- 08-086-06-R2 10×25

**2. 本体質量**

3.0 kg

\*\* 4.0 kg (08-086-30)

**3. 材質**

① 固定ハンドル：ステンレス鋼棒

② 固定金具：ステンレス鋳鋼品

\*\*③, ⑪ 延長板：熱硬化性樹脂積層板

④ サイドレール：ステンレス鋼棒

⑤ マットレス：ウレタン

\*\*⑥, ⑫ マットレス (MOP)：低反発ウレタンフォーム


注：番号は1. 外観図の番号に対応

**\*【使用目的又は効果】**

手術台に付属するアクセサリ。肥満の患者を支持する器具。本体のサイドレールに、上肢台・スクリーン掛を取付可能。

**\*【使用方法等】**

1. 手術台のサイドレールに取り付けます。
2. 固定ハンドルを回して固定します。
3. 手術台の高さに対応したマットレスを取り付けます。

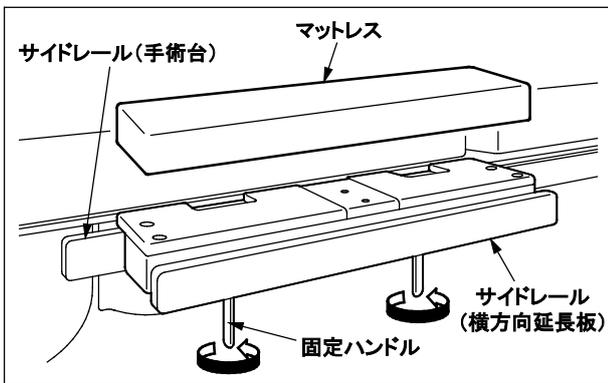

**【使用上の注意】**

**\*1. 警告**

締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。

**2. 重要な基本的注意**

手術台を作動するときには他の併用機器やテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。

**3. 相互作用**

[併用注意]

\* 分離式手術台での使用では、分離/装着は必ず腰部延長ボードを取り外して行ってください。取付けた状態では、分離/装着ができません。

**\*【保管方法及び有効期間等】**

**\*1. 保管方法**

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

**\*2. 耐用期間**

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：7年（注）

[自己認証による]

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品(マットレス含む)の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

**【保守・点検に係る事項】**

**\* <使用者による保守点検事項>**

**1. 使用前・使用後の点検**

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

**2. 清掃・消毒**

血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。

**3. 故障時のお願い**

本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

**\* <業者による保守点検事項>**

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

**\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社千葉工場

**\*【保証期間に係る事項】**

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。