


角度調節式消毒盤台

【禁忌・禁止】

* **他社手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能は確認していません。]**

【形状・構造及び原理等】

1. 外観図

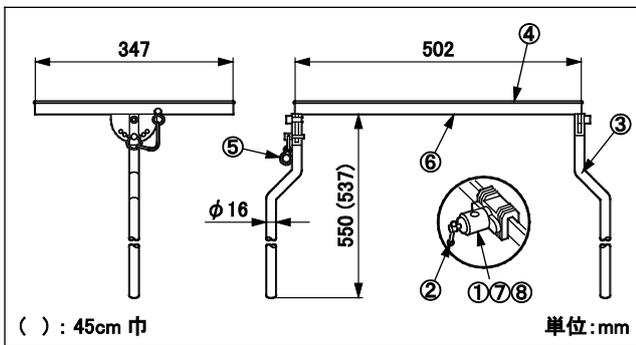

商品コード	商品名	構成
08-098-00	角度調節式消毒盤台 固定金具45cm巾	①②③④⑤ ⑥
08-098-01	角度調節式消毒盤台 固定金具50cm巾	①②③④⑤ ⑥
08-098-01-NC	角度調節式消毒盤台 固定金具 50cm巾 本体のみ (NC)	③④⑤⑥
08-110-01	レール固定金具 (大型) Ver. 2	①②
08-117-09	レール固定金具 (大型) Ver. 2 (R1)	②⑦
08-117-11	レール固定金具 (大型) Ver. 2 (R2)	②⑧

注: 番号は1. 外観図の番号に対応

2. 材質


- ①⑦⑧ レール固定金具 : ステンレス鋳鋼品
- ② 固定ハンドル : ステンレス鋼棒
- ③ 支柱 : ステンレス鋼棒
- ④ 消毒盤 : ステンレス鋼板
- ⑤ 角度調節ピン : ステンレス鋼棒
- ⑥ フレーム : ステンレス鋼棒

注: 番号は1. 外観図の番号に対応

* **【使用目的又は効果】**

手術台に付属するアクセサリ。患者の上にセットする消毒盤。手術台両側のサイドレールに固定金具を介して取り付けて使用します。用途によって、消毒盤の角度を調節できます。

* **【使用方法等】**

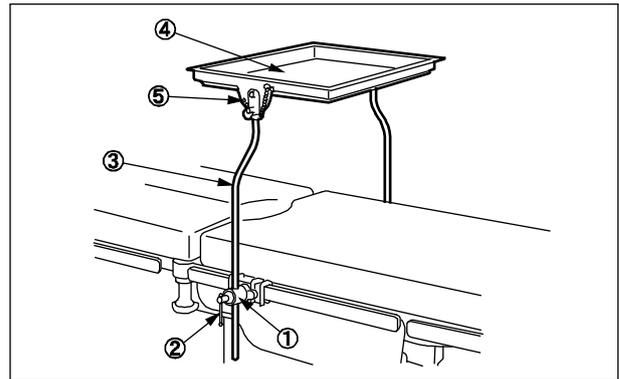

- ① レール固定金具 ④ 消毒盤
- ② 固定ハンドル ⑤ 角度調節ピン
- ③ 支柱

1. 手術台のサイドレールにレール固定金具①を取り付けます。
2. レール固定金具①に支柱③を取り付けます。
3. 固定ハンドル②を調整して固定します。
4. 消毒盤④を取り付けます。
5. 必要に応じて、角度調節ピン⑤で角度を調節します。
(前後各15度さざみで、前後各最大45度傾斜します。)

【使用上の注意】

1. 警告

* 締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。

2. 重要な基本的注意

手術台を作動するときは他のアクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意して下さい。

3. 相互作用

[併用注意]

分離式手術台での使用は分離時にストレッチャーレール受けに接触しない位置まで移動させること。接触するとテーブルトップの分離ができず併用機器及び本品が破損するおそれがあります。

* **【保管方法及び有効期間等】**

* 1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管して下さい。

* 2. 耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合: 7年 (注) [自己認証による]

注: 耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

【保守・点検に係る事項】

* <使用者による保守点検事項>

* 1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認して下さい。

* 2. 清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭して下さい。

* 3. 故障時のお願い

本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

* <業者による保守点検事項>

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社
TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社 千葉工場

【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。