

器01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ (70469000)


手術台頭部板

【禁忌・禁止】

1. 他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能を確認していません。]
2. 手術台を移動させる時は本品を引っ張らないこと。[牽引に使用する事は想定していません。]

【形状・構造及び原理等】

1. 外観図

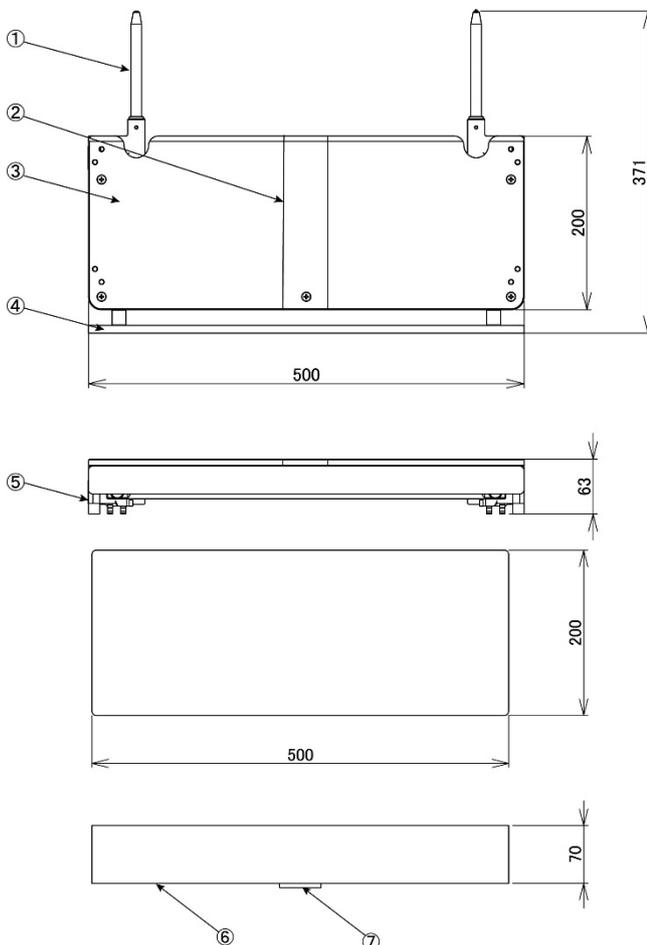

単位：mm

商品コード	商品名	構成	質量
08-075-85	手術台頭部板 20 cm仕様	①②③④⑤ ⑥⑦	13.4 kg

2. 材質

- | | |
|----------|--------------|
| ① 差込軸 | : ステンレス鋼棒 |
| ② 面ファスナー | : ナイロン |
| ③ 頭部板 | : 熱硬化性樹脂積層板 |
| ④ サイドレール | : ステンレス鋼板 |
| ⑤ フレーム | : アルミニウム合金鋳物 |
| ⑥ マットレス | : ウレタンフォーム |
| ⑦ 面ファスナー | : ナイロン |

注：番号は1. 外観図の番号に対応

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリ。背板の頭部板差込孔に差し込み、患者頭部を支持する。

【使用方法等】

1. 取り付け方

- 1-1. 手術台背板の頭部板固定ハンドルをゆるめます。
- 1-2. 頭部板の差込軸を手術台背板の差込孔に差し込みます
- 1-3. 頭部板が手術台背板に完全に差し込まれていることを確認します。
- 1-4. 手術台背板の頭部板固定ハンドルを締めて固定します。

2. 取り外し方

- 2-1. 手術台背板の頭部板固定ハンドルをゆるめます。
- 2-2. 頭部板を手前に引いて、手術台背板から取り外します。

3. 使用可能な手術台

当社製手術台

【使用上の注意】

1. 警告

締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が落下して破損・けがをすることがあります。

2. 重要な基本的注意

- ① 衛生のため、患者が手術台に触れる部分には必ず滅菌済ドレープを使用してください。
- ② 手術台を作動するときは他の手術台アクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

2. 耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：7年(注)

[自己認証による]

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品(マットレスを含む)の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

2. 清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。

3. 故障時のお願い

本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

<業者による保守点検事項>

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社 千葉工場

【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから 1 年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。