

* 2012 年 7 月 12 日改訂(第二版)
2006 年 11 月 20 日作成(第一版)

届出番号:27B1X00051000010

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 送気送水チューブ 70356000

ミストイリゲーション用チューブ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・本製品は、ミストイリゲーションシステム専用であり、他の製品には使用できない。

【形状、構造及び原理等】

〈各部の名称〉

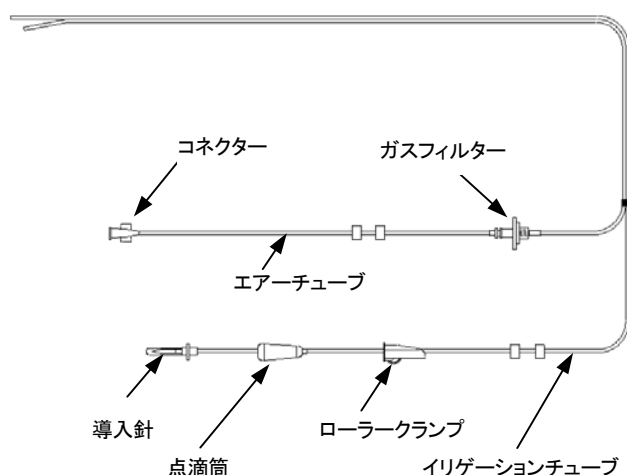

- * 上記は代表例です。
- * 各部件の形状や挿入位置は異なる場合があります。
- ・本品はポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))を使用しております。

【使用目的、効能又は効果】

本品は、送水送気装置と、その処置具等に接続し、送水及び送気を行うために用いる。

【品目仕様等】

気密性:20kPa
引張り強度:10N

【操作方法又は使用方法等】

本品の使用に際しては、下記の[組み合わせて使用する医療機器]に記載した機器を用いること。使用に際しては、ミストイリゲーションコントローラー本体の取扱説明書をご参照ください。

【組み合わせて使用する医療機器】

本品は専用のミストイリゲーションコントローラー(販売名:同左 届出番号:22B3X10001000003)及びミストイリゲーション用ノズル(販売名:同左 届出番号:11B3X00083000001)と組み合わせてエアーモーター等に装着して使用する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・ミストイリゲーションコントローラー本体の取扱説明書を確認後、使用してください。
- ・脂溶性の医薬品ではポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)が溶出する恐れがありますので、注意してください。
- ・包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないでください。
- ・包装を開封したらすぐに使用してください。
- ・使用後は、感染防止に留意し、安全な方法で処分してください。
- ・本製品は、ミストイリゲーションコントローラー及びミストイリゲーション用ノズルと組み合わせたミストイリゲーションシステム専用であり、他の製品には使用できません。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1.貯蔵・保管方法

- ・水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて保管してください。

2.使用の期限

- ・包装の使用期限を参照してください。(自己認証(当社データ)により設定)

【包装】

10 本入り/箱

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

〈製造販売業者〉三矢メディカル株式会社

〒581-0053 大阪府八尾市竹濑東 4 丁目 17 番地

TEL 06-6707-9105

〈製造業者〉三矢メディカル株式会社

* 〈販売業者〉村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号

ミストイリゲーションコントローラー本体の取扱説明書を必ずご参照ください。