2025 年 11 月改訂（第 2 版）＊　　医療機器届出番号：27B3X00343000001

機械器具 24 知覚検査又は運動機能検査用器具
一般医療機器 咀嚼能力検査用物質 （71093001）

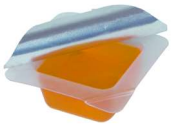
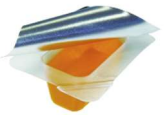
咀嚼能力測定用グミゼリー

再使用禁止

【警告】
1.ゼラチンアレルギーの患者には使用しないこと。［アレルギー症状が発症するおそれがある。］

【禁忌・禁止】
［使用方法］
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
1.形状

全量：5.5g　　半量：2.75ｇ＊

2.型式

咀嚼能力測定用グミゼリー 20 個入
咀嚼能力測定用グミゼリー 100 個入
咀嚼能力測定用グミゼリー（半量） 20 個入
咀嚼能力測定用グミゼリー（半量） 100 個入

3.原材料
麦芽糖、水飴、砂糖、ブドウ糖、ゼラチン、水、ソルビトール、クエン酸、着色料（カロチノイド）、香料、光沢剤

4.原理
患者に本品を咀嚼させ、ろ過用メッシュを載せたコップに吐出させる。吐出した本品の形状をスコア表を元に計測し、咀嚼能力を評価する。

【使用目的又は効果】
咀嚼能力の検査に用いる標準物質である。患者が本品を咀嚼し、その後吐出した形状を計測することで、咀嚼能力を検査する。

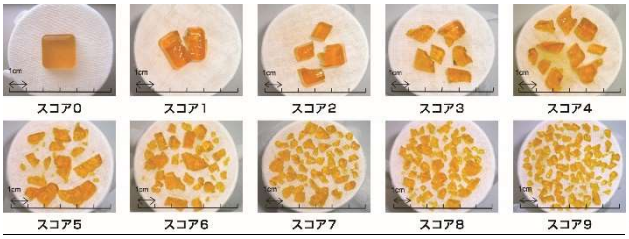
【使用方法等】
使用方法

○必要用具
・咀嚼能力測定用グミゼリー（測定の 30 分前に冷蔵庫から取り出し室温に戻す）
・歯科用ミラー
・ピンセット
・紙コップ
・10cm 角以上のガーゼ

○使用手順
1. 舌の上に咀嚼能力測定用グミゼリー（以下、グミとする）を置く
2. 30 回自由に咀嚼してもらう
3. 紙コップにかぶせたガーゼの上にグミを全部吐き出してもらう
4. 口腔内に残留がないか確認する
5. 問診する　※1　問診内容は以下に記載
6. ガーゼの上にすべてのグミのかけらがある状態にする
7. ガーゼでグミを包み、流水で軽く唾液を除去する
8. 紙カップの上にガーゼを貼り、グミのかけらを均一に広げる
9. スコアシートを参照して、スコアを判定する　※2,3　スコアシートは下記を参照＊

※1　問診内容
1. 噛みにくかったですか？
2. 30 回噛んで飲みこめると思いましたか？
3. 歯や義歯は痛くなかったですか？

※2　咀嚼能率判定用スコアシート
対応型式：咀嚼能力測定用グミゼリー 20 個入
　　咀嚼能力測定用グミゼリー 100 個入



＊

※3　咀嚼能率判定用スコアシート（半量）
対応型式：咀嚼能力測定用グミゼリー（半量） 20 個入
　　咀嚼能力測定用グミゼリー（半量） 100 個入



＊

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞
・包装がすでに破損又は汚損していた場合、使用しないでください。
・開封後は速やかに使用してください。

【使用上の注意】
＜使用注意（次の患者には慎重に適用すること）＞
・ゼラチンアレルギーのある患者［アレルギー症状が発症するおそれがある。］
・幼児、高齢者の患者［誤飲または窒息のおそれがある。］

【保管方法及び有効期間等】
1.保管方法
静置保管
2.保管条件
直射日光・高温多湿を避け、冷蔵（10℃以下）で保存。
3.有効期間
製造後 24 ヶ月。包装の使用期限を参照。

【取扱い上の注意】
・本品は単回使用の医療機器です。使用後は汚染防止、感染防止のためにも速やかに廃棄してください。
・本品を廃棄する場合、自治体の廃棄方法に従って感染防止を留意し廃棄してください。
・本品は食品ではありません。誤って飲み込まないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者
味覚糖株式会社
大阪府大阪市中央区神崎町 4 番 12 号
問合せ先：
味覚糖株式会社お客様相談センター
〒６３９－１０３１
奈良県大和郡山市今国府町１３７－５
フリーダイヤル　０１２０－５５７－１０８
土・日・祝を除く９：００～１７：００
メール：contact@uha-mikakuto.co.jp