

機械器具(21) 内臓機能検査用器具
一般医療機器 単回使用心電用電極 35035000 (体表面筋電計電極 11441001)

ブルーセンサーPM

再使用禁止

【禁忌・禁止】

使用方法


本品はディスプレイ製品ですので再使用できません。

併用医療機器

MRI 検査での本品の使用は、画像の異常や熱傷の原因となる恐れがあるので使用しないで下さい。

【形状・構造及び原理等】

製品外観

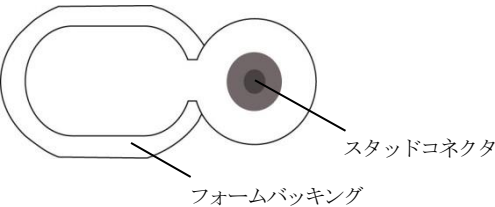

型式	電極寸法[mm]	バックング
N-00-S/25/PM	44.8×22	フォーム

原材料:

スタッドコネクタ: ステンレススチール

センサー: 銀/塩化銀処理純銀テープ

ゲル: ウェットゲル

【使用目的又は効果】

本品は、体表に設置し体表の電気信号を処理装置（心臓の電気活動や筋肉又は神経組織内の生体電気信号等をグラフで表示する）に伝達する導体です。この電気活動を記録する一般的な装置は、心電計（ECG）です。本品は筋電計（EMG）でも使用することができます。本品は単回使用です。

【使用方法等】

- 装着部位をアルコール綿などで清拭し、よく乾かして下さい。
- 電極を袋から取出し、コネクタ裏側の接着面のタブを持ってライナーを剥がして下さい。
- 電極のコネクタ部が下向きになるように皮膚面に軽くあて接着部の縁に沿ってしっかり固定して下さい。
- 指先でコネクタ部を持ち上げてリード線を接続して下さい。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 皮膚疾患や創傷のある部位には、使用しないで下さい。
- 装着部位に発赤・腫脹などの過敏症状が稀に現れることがあります。このような場合は、使用を中止して下さい。
- 開封後は、袋の口を折りたたむなどしてゲルの乾燥防止に努め、早めに使用して下さい。

相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

【併用禁忌】（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像診断装置 (MRI 機器)	使用禁止	誘導起電力による発熱で患者が熱傷を負うことがある。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法:

水濡れに注意し、高温多湿、直射日光のあたる場所を避けて保管して下さい。

保管温度範囲: 10℃～25℃

使用期限:

製造から 24 ヶ月以内 [自己認証 (外国製造業者データ) により設定]

使用期限は、袋の使用期限を参照下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社メッツ

TEL: 03-3888-8445

製造業者・国名:

Ambu A/S・Denmark

アンブ・デンマーク

販売元: パシフィックメディコ株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町 3-5-12

TEL: 03-3500-0816