2024 年　4 月　23 日改定（新様式第 5 版）　　医療機器届出番号　13B1X10185000006

医療用品　04　整形用品

一般医療機器　皮膚バリア粘着プレート　31071000
（一般医療機器　圧迫性被覆・保護材　34084000）

レネロ皮膚バリアシート
RUGFUS ラグファス

【禁忌・禁止】


○表皮の形成されていない開放創および粘膜には使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

本品は、伸縮性のあるシリコーンシートで、粘着性のある面と粘着性のないシリコーン面からなる。

【構造図】図：

長さ16cm×幅2.5cm（シリコーン重量30.6g±1.5g）と
長さ20cm×幅6.5cm（シリコーン重量60.5g±1.5g）の2種類がある。

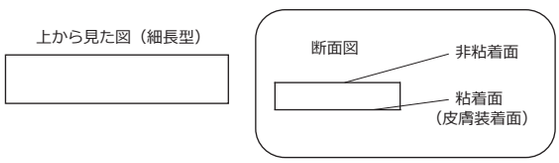

【使用目的又は効果】

・外部の汚染物質から傷あとなどの皮膚部位を保護するために皮膚に粘着するシリコーンシートです。
・体液の貯留予防を目的に患部に圧力を加えるためのシリコーンシートです。

【使用方法等】

1. 貼付部位の汗や汚れ等を清潔な布などで拭き取ります。
2. 容器の蓋を開け付属のヘラで本品を取り出し、開封時上面の装着面（粘着面）を傷あと等の皮膚面に貼ります。
3. 清潔を保つため、シリコーンシートは汚れたら水洗いをして乾かしてから繰り返しご使用ください。（シートは約 1 ヵ月使用できます。）
4. 本品は、毎日なるべく 24 時間続けて使用することをおすすめします。
5. 新品交換を含め 6 ヶ月を目処として継続使用してください。

使用方法に関連する使用上の注意

1. 装着面に付着した皮脂等の汚れは、毎日洗い流してください。粘着面を軽くこするように洗い、たわし等の器具は使用しないでください。
2. 洗ったあとは装着面を上にし、自然乾燥で乾かしてください。ドライヤー等の加熱乾燥しないでください。本品を変形、変性させるおそれがあります。
3. シリコーンシートは繰り返し約 1 ヵ月使用できますが、落ちない汚れや粘着力の低下がある場合は、新しいシリコーンシートに交換してください。
4. 伸縮性のあるシリコーンシートですが、過度に引っ張ると破損するおそれがありますのでご注意ください。
5. 入浴時には取り外してください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 製品に破損、変形等の異常が認められる場合は使用しないでください。
2. 本品の使用中に皮膚のかゆみ、赤みなどの症状があらわれた場合はただちに使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。
3. 本品を口や鼻に入れると窒息の危険がありますので、小児及び監督を必要とする方の手の届かないところに保管してください。
4. 本品は可燃物ですので、火のそばや熱いところには置かないでください。
5. 排水管などの詰まりの原因になりますので、洗面所、トイレ等には流さないでください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
   水ぬれに注意し、直射日光、高温、多湿を避けて保管してください。
2. 使用期限
   製造日より5年。（自己認証により設定）

【包装】

1・5・10・25・50・100 本 / 箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造・製造販売
レネロファーマ株式会社
〒106-0047 東京都港区南麻布 5-10-25-2F
電話番号：03-6277-0897